



Introduzione	6	Introduction
Trattamenti	8	Treatment
Sterilizzazione	11	Sterilization
Confezionamento impianti	12	Packaging implants
Etichettatura e descrizione simboli	13	Labeling and description of symbols
Caratteristiche accessori	14	Characteristics of accessories
Confezionamento accessori	17	Packaging accessories
Guida Viti protesiche	18	Prosthetic screws Guide
Driver	20	Driver

IMPIANTI DENTALI

DENTAL IMPLANTS

ONE (esagono esterno)	22	ONE (external hex)
S.G (esagono esterno)	24	S.G (external hex)
ACTIVE (Esagono interno)	26	ACTIVE (Internal exagon)
KO-INN (Esagono interno)	28	KO-INN (Internal exagon)
S-INN (Esagono interno)	30	S-INN (Internal hex)
TWO (esagono interno)	32	TWO (internal hex)
EVOC (trilobato interno)	34	EVOC (trilob internal)

Kit Chirurgico	36	Surgical Kit
Accessori Kit Chirurgico	37	Accessories Surgical Kit
Materiale per la rigenerazione ossea	38	Material for bone regeneration

ACCESSORI COMPATIBILI

COMPATIBLE ACCESSORIES

Astra Tech® (esagono interno conico)	43	Astra Tech® (internal hex conic)
Biomet 3i® (esagono esterno)	47	Biomet 3i® (external hex)
Biomet 3i Certain® (esagono interno)	52	Biomet 3i Certain® (internal hex)
Frialit Xive® (esagono interno)	57	Frialit Xive® (internal hex)
Leone® (esagono interno)	60	Leone® (internal hex)
Lifecore Prima® (esagono interno)	58	Lifecore Prima® (internal hex)
Neoss® (esagono interno)	62	Neoss® (internal hex)
Nobel Active® (esagono interno conico)	66	Nobel Active® (internal hex conic)
Nobel Branemark® (esagono esterno)	71	Nobel Branemark® (external hex)
Nobel Replace® (Trilobato)	76	Nobel Replace® (Trilobat)
Premium Kohno® (esagono interno)	81	Premium Kohno® (internal hex)
Screw-vent® (esagono interno)	86	Screw-vent® (internal hex)
Straumann Bone level® (esagono interno)	91	Straumann Bone level® (internal hex)
Straumann Tissue Level® (ottagono interno)	94	Straumann® (internal octagon)

Fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento

Out of production, accessories available to end of stock

Camlog® (esagono interno)	97	Camlog® (internal hex)
Global® (esagono interno)	99	Global® (internal hex)
Winsix® (esagono interno)	101	Winsix® (internal hex)

DAKKS CERT / 16.13
 ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT


 Product Service

CERTIFICATO
N° Q1N 17 01 84091 003

Titolare del certificato: Dental Planet
Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALIA

Stabilimento(i): Dental Planet Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALIA

Marchio di certificazione: 

Campo di applicazione: Progettazione e sviluppo, produzione e distribuzione di impianti dentali e monconi. Distribuzione di strumenti per impianti dentali

Norma(e) applicata(e): EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Dispositivi medicali - Sistemi di gestione qualità - Requisiti a fini normativi (ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

L'Ente certificatore di TÜV SÜD Product Service GmbH certifica che la società sopramenzionata ha istituito e gestisce un sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della(e) norma(e) elencata(e). Vedere anche note sul retro.

N° del rapporto: ITA853743

Valido da: 2017-04-01
Valido fino al: 2020-03-31

Data: 2017-02-23


 Stefan Preiß


 697734


 Deutsche Akkreditierungsstelle
 D-24113 Kiel

Pagina 1 di 1
Traduzione per scopi informativi. La sola versione inglese è legalmente impegnativa.

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

DAKKS CERT / 16.13
 ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT


 Product Service

CERTIFICATE
No. Q1N 17 01 84091 003

Holder of Certificate: Dental Planet
di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALY

Facility(ies): Dental Planet di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALY

Certification Mark: 

Scope of Certificate: Design and development, production and distribution of dental implants and abutments. Distribution of instruments for surgical dental implant

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: ITA853743

Valid from: 2017-04-01
Valid until: 2020-03-31

Date: 2017-02-23


 Stefan Preiß


 84052768908735


 Deutsche Akkreditierungsstelle
 D-24113 Kiel

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ 認証証書 ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT



CERTIFICATO CE

Sistema completo di garanzia di qualità
Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (DDM), allegato II escluso (4)
(dispositivi in classe IIa, IIb o III)
N° G1 14 03 84091 002

Fabbricante: Dental Planet
Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALIA

Stabilimento(i): Dental Planet Di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALIA

Categoria(e) di prodotti: Impianti dentali e accessori per impianti dentali
(monconi, viti di guarigione e viti di connessione)

Con il presente certificato, l'organismo notificato di TÜV SÜD Product Service GmbH certifica che il fabbricante sopra menzionato ha implementato un sistema di garanzia di qualità per la progettazione, la fabbricazione ed il controllo finale dei dispositivi / delle categorie di dispositivi in questione, secondo quanto stabilito nella direttiva DDM, allegato II. Questo sistema di qualità risponde ai requisiti della presente direttiva ed è soggetto a sorveglianze regolari. Per l'immissione sul mercato di dispositivi della classe III, è richiesto un certificato addizionale di cui all'allegato II (4). Osservare le note riportate sul retro.

N° del rapporto: ITA 241885

Valido da: 2014-04-01
Valido fino al: 2019-03-31

H.-H. Junker



Data: 2014-04-02
Hans-Heiner Junker

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH è Organismo Notificato con numero identificativo 0123.

Pagina 1 di 1
Traduzione per scopi informativi. La sola versione inglese è legalmente impegnativa.

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TUV®



EC Certificate

Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex II excluding (4)
(Devices in Class IIa, IIb or III)

No. G1 14 03 84091 002

Manufacturer: Dental Planet
di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B
41125 Modena
ITALY

Facility(ies): Dental Planet di Barozzini Marco & C. S.A.S.
Via Imola, 90/B, 41125 Modena, ITALY

Product Category(ies): Dental implants and accessories
for dental implant
(abutment, healing and connection screws)

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex II. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III devices an additional Annex II (4) certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.: ITA 241885

Valid from: 2014-04-01
Valid until: 2019-03-31

H.-H. Junker



Date, 2014-04-02
Hans-Heiner Junker

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

TUV®

DENTAL PLANET Società italiana leader nel campo dell'impiantologia orale, specializzandosi nella progettazione di prodotti come impianti dentali, accessori protesici compatibili e materiali per la rigenerazione ossea. L'esperienza acquisita negli anni ci ha permesso di sviluppare tecnologie implanto-protesiche di alto livello qualitativo e materiali innovativi a prezzi convenienti.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

I corsi e le serate culturali illustrano una numerosa gamma di soluzioni protesiche in linea con la filosofia dell'azienda che propone tecniche sempre nuove che danno risultati sicuri e validi in alternativa alle tecniche già conosciute e in uso da molti anni. L'esperienza di odontotecnici e dentisti che collaborano attivamente con noi, unita all'attività di ricerca del nostro dipartimento di tecnico-progettuale e di micro meccanica, hanno permesso di raggiungere ottimi risultati e di poter sviluppare corsi che interessano tutti gli operatori del settore.

SVILUPPO E RICERCA

Grazie ai suggerimenti dei nostri clienti e alla risoluzione delle loro problematiche siamo in costante miglioramento dei nostri prodotti e delle nostre tecniche.

Avvalendoci anche di appoggi all'interno di enti e strutture di studi superiori, riusciamo a verificare la validità dei nostri prodotti secondo le ultime tecnologie e le tecniche più aggiornate. Inoltre l'esperienza ci permette di valutare e innovare facendo design e producendo materiali che vengono studiati e testati all'interno delle nostre strutture e certificati per differenti paesi.

PRODUZIONE

Ingegneri, periti meccanici, tecnici qualificati compongono lo staff.

Per produrre le componenti ci avvaliamo di torni a barre a controllo numerico dell'ultima generazione, macchine di alta precisione, con correzioni dinamiche degli utensili, che permettono il rispetto di tolleranze di $\pm 0,001\text{mm}$ (1 micron).

Tutte le innovazioni introdotte nelle fasi produttive e nelle caratteristiche del prezzo sono frutto di continui ed approfonditi studi nonché di rilevanti e costanti investimenti.

QUALITÀ E CONTROLLO

Sofisticati sistemi di gestione controllano costantemente tutte le fasi produttive, intervenendo in modo automatico sui processi in corso, in caso di scostamento rispetto ai parametri impostati. Il controllo della produzione si basa sui protocolli definiti SPC (Statistic Process Control) nei quali vengono fissate le quantità e la frequenza dei controlli (secondo la tipologia del prodotto) e i criteri di accettabilità. I controlli dimensionali avvengono su macchine di misurazione tridimensionale dell'ultima generazione, in grado di assicurare una precisione di $\pm 0,0005\text{mm}$ (0,5 micron). La qualità della produzione è conforme alle normative EN ISO 13485:2012/AC:2012 e 93/42/EEC relative ai dispositivi medici.

DENTAL PLANET Italian company leader in the field of oral implantology, specializing in the design of products such as dental implants, prosthetic accessories and compatible materials for bone regeneration. The experience gained over the years has allowed us to develop prosthetic - implant technologies, high-quality and innovative materials at affordable prices.

EDUCATION AND TRAINING

Courses and cultural evenings show a large range of prosthetic solutions in line with the philosophy of the company offering new technical results that give safe and valid alternative to the techniques already known and in use for many years.

The experience of dentists and dental technicians who work closely with us, together with the research activities of our department of technical planning and micro mechanics, have allowed us to achieve excellent results and to develop courses of interest to all operators in the sector.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Thanks to the suggestions of our customers and to solve their problems we are constantly improving our products and of our techniques.

Availing ourselves of supports and structures within institutions of higher learning, we are able to verify the validity of our products according to the latest technologies and techniques more associated. Moreover, the experience allows us to evaluate and design and innovate by producing materials that are designed and tested in our facilities and certificates for different countries.

PRODUCTION

Engineers, mechanical technicians, skilled technicians make up the staff.

To produce the components we employ bar lathes with numerical control of the last generation, high precision machines, with dynamic corrections of the tools, which allow the respect of tolerances of 0.001 mm (1 micron).

All of the innovations introduced in the early stages of production and the characteristics of the price are the result of continuous and in-depth studies as well as to significant and ongoing investments.

QUALITY AND CONTROL

Sophisticated management systems constantly monitor all stages of production, acting automatically on pending lawsuits, in case of deviation from the set parameters. The control of the production is based on the protocols defined SPC (Statistic Process Control) in which are fixed the amount and frequency of controls (depending on the type of product) and the criteria of acceptability. The dimensional controls are made on the three-dimensional measuring machines of the latest generation, capable of ensuring an accuracy of $\pm 0.0005\text{ mm}$ (0.5 microns). The quality of production and complies with EN ISO 13485:2012 / AC : 2012 and 93/42/EEC concerning medical devices.

I MAGAZZINI

Lo stoccaggio della maggior parte dei prodotti semilavorati e finiti è affidato a personale qualificato. Tutte le componenti vengono controllate in entrata, divise e confezionate secondo standard qualitativi, tutto per permettere agli operatori di una precisa preparazione degli ordini. Per ordini standard le consegne in Italia sono effettuate in 24 ore e all'estero in 5 giorni lavorativi.

IL SERVIZIO CLIENTI

Dental Planet lavora per soddisfare tutte le esigenze del cliente ed è presente con propri distributori in Italia e all'estero. L'assistenza pre e post-vendita è offerta da personale qualificato del reparto tecnico e del reparto commerciale sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi quesito e a dare informazioni quanto più dettagliate possibili per aiutare il cliente nella scelta del prodotto, nella sua applicazione e utilizzo.

ORDINI: Si accettano ordini via mail e telefonici.

EVASIONE ORDINI: La merce normalmente è disponibile in magazzino. Per la parte non disponibile, la consegna sarà effettuata al più presto possibile e comunque non oltre 15/20 gg. lavorativi salvo comunicazioni contrarie.

TEMPI DI CONSEGNA : 24/48 ore

IMBALLO: Gratuito

SPEDIZIONI: La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. La spedizione avviene tramite corriere espresso con relativo addebito in fattura

GARANZIA: Tutta la merce è garantita. Se non conforme al campione o descrizione, potrà essere resa entro 10 giorni dalla ricezione e provvederemo al rimborso immediato o alla sostituzione.

PREZZI: I prezzi sono soggetti a variazioni senza alcun obbligo di preavviso.

RESI: Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. Dovranno essere indicati i motivi del reso e se accettato, la merce dovrà essere accompagnata da d.d.t. contenente il numero e la data della fattura relativa alla merce contestata. Non si accettano resi di materiale oltre i 30 gg. dalla data della bolla di consegna. La merce inviata dovrà sempre essere spedita in porto franco.

CONTROVERSIE: Per tutte le controversie è competente il foro di Modena.

The WAREHOUSE

The storage of the majority of semi-finished products and finished products and entrusted to qualified personnel. All components are checked on entry, split and packaged in accordance with quality standards, all to allow operators to a specific preparation of orders. Orders for standard deliveries are made in Italy and abroad in 24 hours in 5 working days.

CUSTOMER SERVICE

Dental Planet works to meet all the needs of the customer and is present with its own distributors in Italy and abroad. Assistance pre and post-sale service is offered by qualified technical department and sales department are always available to answer any question and to provide information as detailed as possible for the customer to choose of the product, its application and use.

ORDERS: We accept orders by email and telephone.

EVADE THE ORDERS : The merchandise is usually available in stock. To the extent not available, delivery will be made as soon as possible and no later than 15/20 days. business communications unless otherwise specified.

DELIVERY TIME : 24/48 hours

PACKING: Freeware

SHIPPING: The merchandise travel at the risk and peril. Delivery is by express courier with relative charge on the invoice

WARRANTY: All merchandise is guaranteed. If not conform to the sample or description, can be returned within 10 days of receipt and we will refund or immediate replacement.

PRICES: Prices are subject to change without notice.

RETURNS: Returns are not accepted unless previously authorized. They will be given for the return and if accepted, the merchandise must be accompanied by ddt containing the number and date of the invoice relating to the goods at issue. We do not accept returned goods over 30 days. from the date of the delivery. The merchandise sent will always be shipped prepaid.

DISPUTES: All disputes are settled by the Court of Modena.

SCOPO

Scopo del presente documento è dimostrare l'elevato grado di biocompatibilità del titanio trattato in superficie con il metodo chimico denominato TIROUGH; allo scopo si riportano gli abstract di articoli pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Per quanto riguarda l'analisi in vitro fare riferimento al documento allegato "Surfaces Comparison: comparison between a novel etched surface and TiUnite-like surfaces".

Si chiarisce che i trattamenti TiRough e BioRough sono in realtà il medesimo trattamento, il nome si differenzia solo ai fini commerciali.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI :

Giordano C., Sandrini E., Busini V., Chiesa R., Fumagalli G., Giavaresi G., Fini M., Giardino R., Cigada A., A new chemical etching process to improve endosseous implant osseointegration: in vitro evaluation on human osteoblast-like cells.

Giordano C., Sandrini E., Del Curto B., Signorelli E., Rondelli G., Di Silvio L., Titanium for osteointegration:

Comparison between a novel biomimetic treatment and commercially exploited surfaces.

Chiesa R., Giavaresi G., Fini M., Sandrini E., Giordano C., Bianchi A., Giardino R., In vitro and in vivo performance of a novel surface treatment to enhance osseointegration of endosseous implants. Politecnico di Milano, Rizzoli orthopedic institute, and Vita-salute University. *Pathol oral radiol endod* 2007;103:745-56.

INFORMAZIONI GENERALI :

Il trattamento di superficie TiRough consiste nella modifica della superficie del titanio e delle sue leghe attraverso un processo che combina un processo di sabbiatura e successiva mordenzatura chimica con acidi inorganici a bassa concentrazione.

Tali tecniche non solo garantiscono la formazione sulla superficie del titanio e delle sue leghe di una particolare morfologia superficiale, ma inoltre grazie alla forza del processo chimico garantisce una decontaminazione assoluta da residui organici provenienti dalle operazioni di lavorazione meccanica, se ancora presenti dopo i processi di lavaggio.

La superficie di un componente, sia esso impianto dentale o impianto ortopedico, trattata con il metodo

TiRough presenta una superficie microporosa, che stimola adesione e differenziazione osteoblastica (cellule del tessuto osseo) e stimola la mineralizzazione del tessuto osseo e di conseguenza la maturazione di tale tessuto.

PRINCIPI TEORICI - STATO DELL'ARTE

Le condizioni di trattamento con acidi sono state definite sulla base della letteratura tecnico-scientifica in materia e sulle conoscenze sviluppate da questa Società nel corso delle sue attività di sviluppo di trattamenti chimici ed elettrochimici di dispositivi medici impiantabili.

Il trattamento eseguito prevede una prima fase di sabbiatura con corindone bianco seguita da una fase di mordenzatura chimica con una miscela di acidi, cloridrico e solforico, a basse concentrazioni ad una temperatura di 50°C. Il processo chimico, oltre a conferire una superficie porosa, elimina i residui di abrasivo utilizzato durante la fase di sabbiatura.

PURPOSE

The purpose of this document is to demonstrate the high degree of biocompatibility of the treated titanium surface with the chemical method called TIROUGH; order we report the abstracts of articles published in journals national and international.

As for the in vitro analysis refer to the attached document "Surfaces Comparison: comparison between a novel and etched surface TiUnite-like surfaces".

It clarifies that the treatments and TiRough BioRough are actually the same treatment, the name differs only for marketing purposes.

REFERENCES :

Jordan C., E. Sandrini, Busini V., R. Church, Fumagalli G., Giavaresi G., M. Fini, Garden R., Cigada A., A new chemical etching process to improve endosseous implant osseointegration: in vitro on human evaluation osteoblast-like cells.

C. Giordano, Sandrini E., Del Curto B., E. Signorelli, Rondelli G., Di Silvio L., Titanium for osteointegration: Comparison between a novel biomimetic treatment and commercially surfaces exploited.

R. Church, Giavaresi G., M. Fini, Sandrini E., C. Giordano, A. Bianchi, R. Garden, In vitro and in vivo performance of a novel surface treatment to Enhance osseointegration of implants endosseous. Politecnico di Milano, Rizzoli orthopedic institute, and Life-Health University. *Pathol Oral radiol endod* 2007; 103: 745-56.

GENERAL INFORMATION :

The surface treatment TiRough is the surface modification of titanium and its alloys through a process that combines a blasting process and subsequent chemical etching with acids inorganic low concentration.

These techniques will not only ensure the formation on the surface of titanium and its alloys of a particular surface morphology, but also thanks to the strength of the chemical process guarantees decontamination absolute organic residues from the mechanical processing operations, if still present after the washing processes.

The surface of a component, whether dental implant, or orthopedic implant, treated with the method TiRough has a microporous surface, which stimulates osteoblast adhesion and differentiation (cells bone tissue) and stimulates the mineralization of bone tissue and therefore the maturing of this fabric.

THEORETICAL PRINCIPLES - STATE OF THE ART

The conditions of treatment with acids have been defined on the basis of the technical and scientific literature in matter and knowledge developed by this company in the course of its development activities of treatments chemical and electrochemical implantable medical devices.

The processing performed includes a first step of sandblasting with corundum white followed by a step of chemical etching with a mixture of acids, hydrochloric acid and sulfuric acid, at low concentration to a temperature of 50°C. The chemical process, besides giving a porous surface, removes residual abrasive used during the sandblasting phase.

TiRough

Caratterizzazione del TiRough
Analisi morfologica
Profilometria

Con questa tecnica sono stati analizzati i profili di rugosità 1D, mappe 2D e 3D di campioni trattati TiRough.

TiRough

Characterization of TiRough
Morphological analysis
Profilometry

With this technique, we analyzed the roughness profiles 1D, 2D and 3D maps of samples treated TiRough.

Figura 1: mappatura 2D e 3D / Figure 2 : 2D and 3D mapping

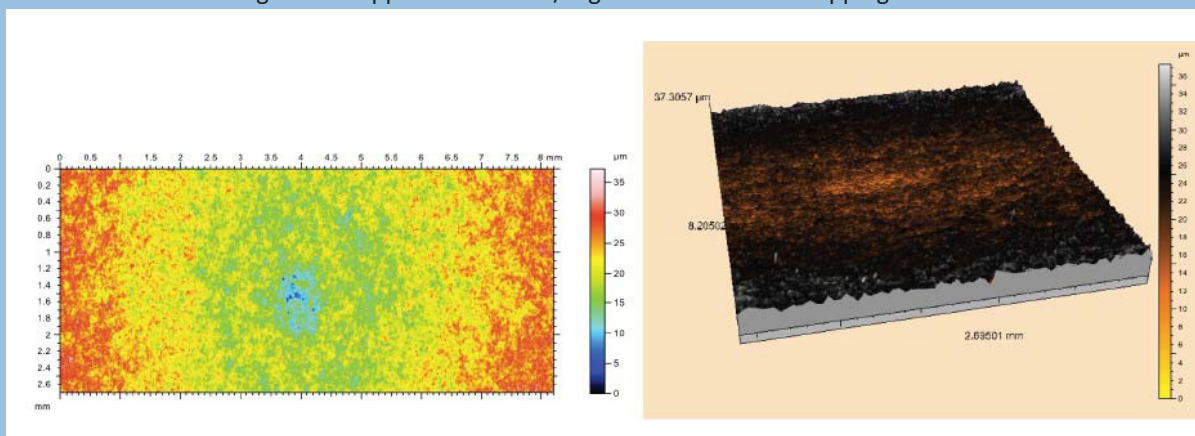


Figura 2: mappatura 2D e 3D / Figure 2 : 2D and 3D mapping


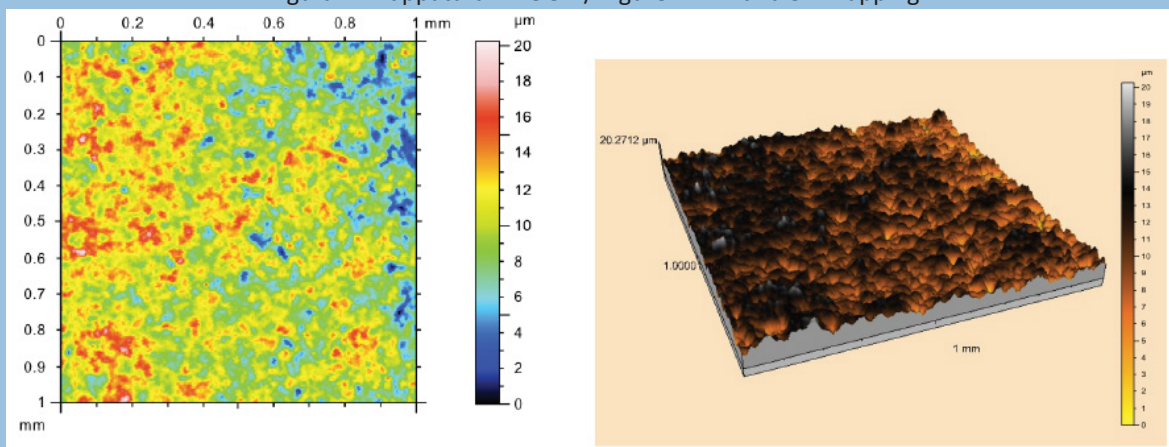


Figura 3: Profilo di rugosità 1D della superficie - Figure 3: Surface roughness profile 1D

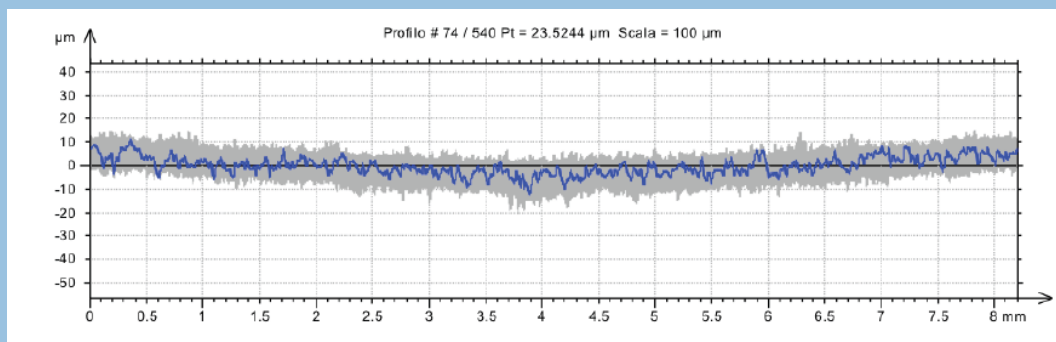

$$R_a = 1,65901\mu m \pm 0,088049\mu m$$

$$Min : 1,4437\mu m; Max : 1,9320\mu m$$

$$R_z = 10,5554\mu m \pm 0,68608\mu m$$

$$Min : 8,95313\mu m; Max : 13,318\mu m$$


Microscopia elettronica a scansione (SEM)

In questo paragrafo sono riportate le immagini SEM dei campioni trattati TiRough.

Scanning electron microscopy (SEM)

This section shows SEM images of the samples treated TiRough.

Figura 4: immagine SEM / Figure 4 : SEM image

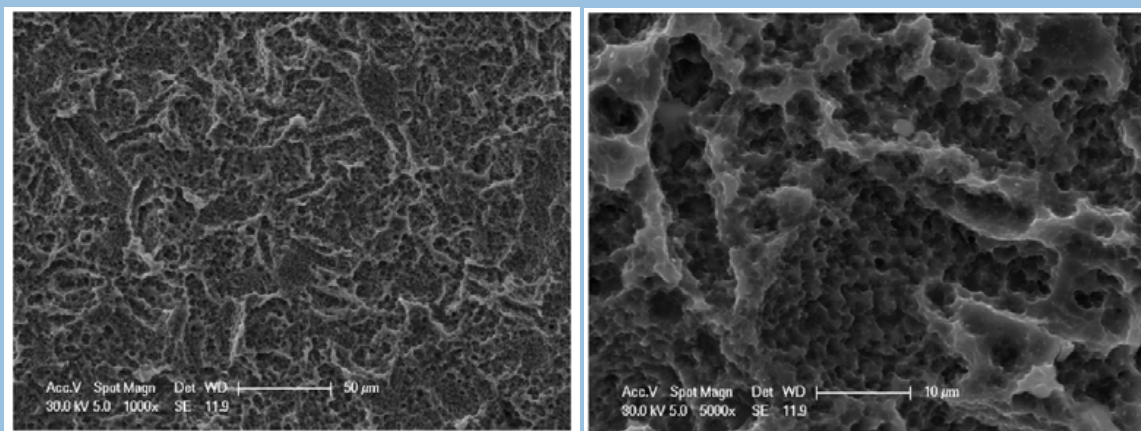

Analisi composizionale della superficie

Spettroscopia a dispersione di energia (EDS)


Lo stato composizionale della superficie è stato valutato mediante analisi chimica con tecnica EDS, tale tecnica è utilizzata nella letteratura scientifica per valutare il grado di decontaminazione delle superfici metalliche.

Compositional analysis of the surface

Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)

The state of the surface compositional was evaluated by chemical analysis with EDS technique, this technique is used in the scientific literature to assess the degree of decontamination of metallic surfaces.

Figura 5: spettro EDS / Figure 5 : EDS spectrum

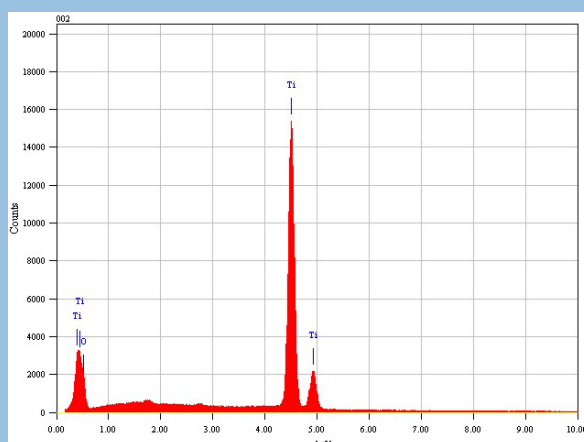

Conclusioni

In conclusione, le analisi di caratterizzazione condotte hanno permesso di verificare:

- Il processo TiRough modifica il primo strato superficiale dei dispositivi trattati
- La rugosità ottenuta è in linea con quanto ritenuto, allo stato dell'arte, idoneo per la promozione dell'adesione cellulare e guarigione ossea.
- Il processo TiRough consente la completa decontaminazione da residui di sabbatura (corindone).
- La superficie ottenuta è paragonabile come caratteristiche chimico fisiche a trattamenti già ampiamente utilizzati in commercio come SLA e Osseotite.

Conclusions

In conclusion, the characterization analysis conducted allowed to verify:

- The process TiRough change the first layer of devices covered
- The roughness obtained is in line with what is considered, state of the art, suitable for promotion cell adhesion and bone healing.
- The process allows the complete decontamination TiRough residues blasting (corundum).
- The surface obtained is comparable as chemical and physical treatments already widely used commercially as SLA and Osseotite.

GAMMA 25kGy

- dispositivi medici monouso in conformità alla direttiva europea 93/42
- dispositivi medico-diagnostici in vitro in conformità alla direttiva europea 98/79
- materie prime e prodotti farmaceutici (uso umano ed uso veterinario) in base alle autorizzazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del Ministero della Salute.

Sterigenics applica e sviluppa la tecnologia dei raggi gamma per offrire alle imprese un servizio di sterilizzazione dei prodotti sicuro ed efficace, in grado di migliorare e accrescere sia le caratteristiche che le funzionalità dei prodotti stessi.

Sterigenica è autorizzata:

- dal Ministero della Salute alla sterilizzazione di sostanze attive/eccipienti ad uso veterinario (conformità alle Norme di Buona Fabbricazione/GMP);
- dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) come Officina Farmaceutica per la sterilizzazione di materie prime e specialità medicinali (conformità alle GMP)

Sterigenics è accreditata:

- in Giappone presso l'Healt, Labour and Welfare Ministry
- nel Regno Unito presso l'HMRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
- negli USA presso l'FDA, Food and Drug Administration (registrata presso il database dei produttori di Dispositivi Medici).

Legislazione in materia

Settore Medico e Diagnostico:

Direttiva 93/42/CE "DISPOSITIVI MEDICI" recepita dal Decreto Legislativo n° 46 del 24 febbraio 1997. Emendato col D.Lgs n° 37 del 25/01/2010.

Direttiva 98/79/CE "DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO" recepita dal Decreto Legislativo n° 332 del 08 settembre 2000. Emendato col D.Lgs n° 37 del 25/01/2010.

Norme di sistema

UNI EN ISO 9001:2008 - Sistemi di gestione per la qualità

UNI CEI EN ISO 13485:2012- Dispositivi medici – Sistemi di gestione per la qualità

UNI EN ISO 14001:2004 - Sistemi di gestione ambientale

BS OHSAS 18001:2007 - Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori

SA8000:2008 - Sistemi di Responsabilità Sociale d'Impresa

GAMMA 25kGy

- Disposable medical devices in accordance with European Directive 93/42
- In vitro diagnostic medical devices in accordance with European Directive 98/79
- pharmaceutical raw material and medicinal products (human and veterinary use) according to the authorizations of Italian Drug Agency and Italian Healthcare Ministry.

Sterigenics applies and develops the gamma ray technology that ensures a safe and effective sterilization of a variety of industry products, at the same time improving and increasing both the characteristics and the applications of the products themselves.

Sterigenics is authorized by:

- Healthcare Ministry for the sterilization of active substances and ingredients for veterinary use (in conformity with GMP);
- AIFA (Italian Drug Agency) as Pharmaceutical for the sterilization of raw materials and medicinal products (in conformity with GMP)

Sterigenics is accredited by:

- Japanese Health, Labour and Welfare Ministry
- British HMRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
- in the US FDA, Food and Drug Administration (Registration and Device Listing Database).

Legislation

Medical and Diagnostics Sector:

Directive 93/42/CE "MEDICAL DEVICES" implemented by Legislative Decree 46 of 24 February 1997 amended by Legislative Decree 37 of 25 January 2010.

Directive 98/79/CE "IN VITRO MEDICAL/DIAGNOSTIC DEVICES" implemented by Legislative Decree 332 of 08 September 2000 amended by Legislative Decree 37 of 25 January 2010.

Standards

UNI EN ISO 9001:2008 - Quality Management System

UNI CEI EN ISO 13485:2012 - Medical devices – Quality Management Systems

UNI EN ISO 14001:2004 - Environment Management Systems

BS OHSAS 18001:2007 - Occupational health and safety Managements System

SA8000:2008 - Social Responsibility System

Tutte le modifiche di prodotto degli ultimi anni sono state basate sui suggerimenti dei clienti al fine di rendere i nostri sistemi implantari più efficienti e più facili da usare.

Prelevamento dell'impianto semplificato:

Le nuove confezioni assicurano un facile accesso agli impianti e alla vite di copertura.

Gli impianti possono essere facilmente prelevati dalla busta grazie al trasportatore "no touch", che consente di portare l'impianto direttamente in bocca senza fasi intermedie ed iniziare l'invito per poi terminare con il cricchetto o la chiave a contrangolo. La vite di copertura è situata nella parte superiore del trasportatore.

All product changes in recent years have been based on customer feedback in order to make our implant systems more efficient and easier to use.

Pick simplified system:

The new packaging ensures easy access to plants and the cover screw.

The implants can be easily removed from the envelope thanks to the "no touch" conveyor, which allows you to bring the implant directly into the mouth without intermediate steps and start the call and then end with a ratchet or contra-angle.

The cover screw is situated in the upper part of the conveyor.



PASSAPORTO IMPLANTARE


Ogni impianto è accompagnato da un "passaporto implantare" rilasciato dall'implantologo al paziente dopo l'intervento.

È una garanzia di qualità degli impianti e dei componenti utilizzati, contiene anche la tracciabilità e le informazioni utili per una gestione attenta.

IMPLANT PASSPORT

Each implant is accompanied by an "implant passport" issued dall'implantologo to the patient after the surgery.

It is a guarantee of quality of equipment and components used, it also contains useful information for traceability and careful management.

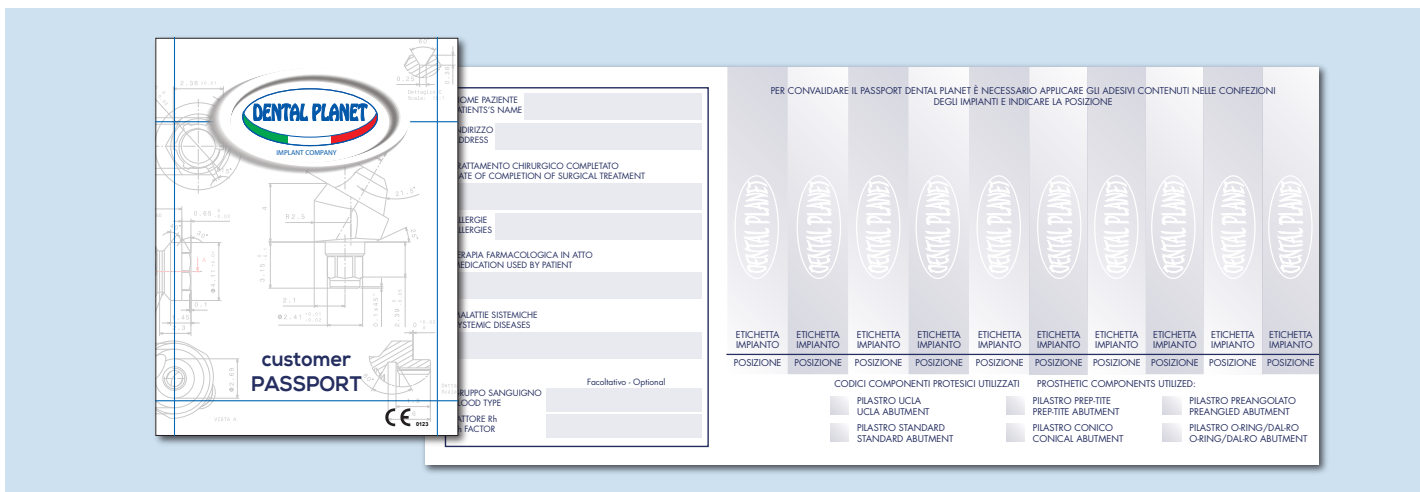


L'etichette sulle confezioni di ogni dispositivo medico messo sul mercato riportano i simboli in conformità alle normative EN ISO 13485:2003/AC:207 and 93/42/EEC relative ai dispositivi medici.

The label on the packaging of any medical device placed on the market show the symbols in accordance with EN ISO 13485:2003 / AC: 207 and 93/42/EEC concerning medical devices.


Etichetta scatola impianto / paziente

Implant box label / patient

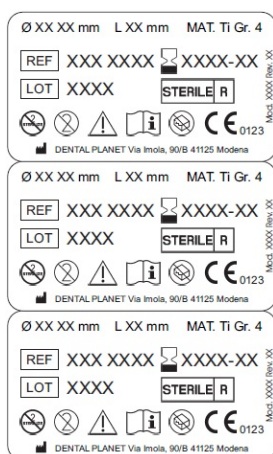

Implant envelope label

Etichetta busta impianto

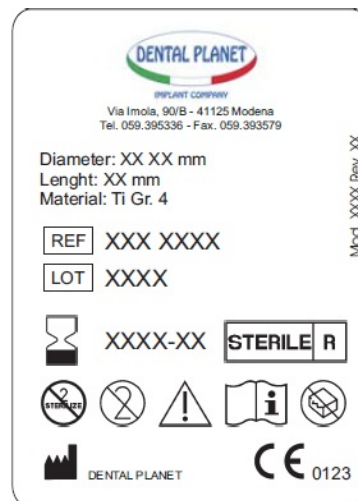

DESCRIZIONE SIMBOLI ETICHETTE IMPIANTI

DESCRIPTION OF SYMBOLS LABELS IMPLANTS

Codice prodotto.....		Product code
Numero di lotto.....		Lot number
Il dispositivo deve essere utilizzato da personale medico.....		The device must be used by medical personnel
Produttore.....		Producer
Leggere il foglietto illustrativo.....		Read the package leaflet
Data scadenza, anno/mese.....		Sell by date (year and month)
Dispositivo monouso.....		Disposable device
Sterilizzazione a Raggi Gamma.....		Gamma sterilization
Non risterilizzare.....		No re-sterilize
Non usare se la confezione è danneggiata.....		Do not use if the packaging is damaged

COMPONENTI

Dental Planet produce e commercializza accessori protesici per innumerevoli piattaforme implantari, tutte totalmente compatibili. Purtroppo essendo sempre in continuo ampliamento la gamma di accessori prodotti vi chiediamo gentilmente di contattarci se non trovate nel catalogo il particolare che cercate.

Ricordiamo inoltre che Dental Planet è in grado di fare piccole produzioni, basta inviarci il disegno tecnico o il campione del particolare e nel più breve tempo l'azienda vi fornirà un preventivo e tempi di consegna.

Moncone di Guarigione :

Da utilizzare alla scopertura dell'impianto. Il moncone viene avvitato all'impianto e lasciato a riposo fino alla guarigione delle gengive opportunamente adattate mediante sutura attorno allo stesso. L'uso di questi componenti e quello di riabilitare i tessuti molli sopra l'impianto affinché possa essere inserito il moncone protesico definitivo.

Specifiche Tecniche:

- Prodotto in Titanio Grado 5 per una perfetta guarigione.
- Il prodotto viene fornito già decontaminato per abbattere la carica microbica
- Disponibile in differenti altezze per adattarsi ai vari spessori gengivali.
- Il prodotto è MONOUSO.
- Fornito in confezione singola NON STERILE, da sterilizzare in autoclave da parte del medico prima del utilizzo sul impianto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e a temperatura ambiente avendo cura di mantenere integra la confezione.

Monconi in Titanio :

I monconi in Titanio fissati mediante vite passante all'impianto dentale, ne consentono l'ancoraggio protesico.

Specifiche Tecniche:

- Prodotto in Titanio Grado 5 per garantire un'ottima resistenza al carico masticatorio.
- Il prodotto viene fornito già decontaminato per abbattere la carica microbiologica
- Fornito in confezione singola compreso di vite, NON STERILE. Sterilizzare la vite passante e il manufatto finale in autoclave dall'utilizzatore prima dell'uso
- Il prodotto è MONOUSO
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e a temperatura ambiente avendo cura di mantenere integra la confezione.

I monconi in titanio possono essere :

Monconi definitivi

- Disponibili in diverse forme ed emergenze transmucose per meglio adattarsi alle necessità estetiche del paziente.

Monconi provvisori

- Disponibili sia rotanti che non rotanti, adatti per la cementazione di cappete provvisorie.

Monconi da incollaggio

- Disponibili sia rotanti che non rotanti, specifici per la tecnica Cad-Cam.

COMPONENTS

Dental Planet manufactures and markets accessories for countless prosthetic implant platforms, all fully compatible. Unfortunately, being always continuously widening range accessories products we kindly ask you to contact us if you do not find in the catalog detail you're looking

Recall in addition that the Dental Planet is able to make small production, just send us the technical drawing or sample piece and as soon as the company will provide you with a quote and delivery time.

Healing Abutment :

Use the unveiling of the plant. The stump is screwed on the implant and left standing until the healing of the gums suitably adapted suture around the same. The use of these components and to rehabilitate soft tissue over the facility in order to insert the final prosthetic abutment.

Technical Specifications:

- Produced in grade 5 Titanium for perfect healing.
- The product is supplied decontaminated to reduce the microbial load
- Available in different heights to fit various gingival thicknesses
- The product is DISPOSABLE
- Supplied in single packaging NO STERILE, to sterilize in autoclave by the doctor before using it on the implant
- Store the product in a dry place and at room temperature, taking care to keep the packaging intact.

Titanium Abutment :

- Titanium Abutment fixed through the screw to the dental implant, allow the prosthesis anchoring

Technical Specifications:

- Made of Titanium Grade 5 to ensure excellent resistance to chewing load.
- The product is supplied decontaminated to reduce the microbial load
- Supplied in single pack with screw, NO STERILE. Sterilize the abutment screw and the final product in autoclave by the doctor before using
- The product is DISPOSABLE
- Store the product in a dry place and at room temperature, taking care to keep the packaging intact.

Titanium abutment they can be :

Final Abutment :

- Available in various forms and transmucosal emergencies to better adapt to the aesthetic needs of the patient

Temporary Abutment :

- Available rotating and non rotating, suitable for cementation of provisional cover

Abutment for bonding

- Available rotating and non rotating, usable for the cad-cam.

COMPONENTI

Monconi Calcinabili da fusione in plexiglas :

I monconi calcinabili in plexiglas sono disponibili rotanti e non rotanti, sono preformati e devono essere modificati nella forma definitiva mediante fusione.

Destinati all'utilizzo da parte dell'odontotecnico.

Specifiche Tecniche:

- Prodotto in Plexiglas, materiale ideale in quanto privo di residui durante la fusione.
- Il prodotto viene fornito già decontaminato per abbattere la carica microbiologica
- Il prodotto è MONOUSO
- Fornito in confezione singola compreso di vite, NON STERILE. Sterilizzare la vite passante e il manufatto finale in autoclave dall'utilizzatore
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e a temperatura ambiente avendo cura di mantenere integra la confezione.

Monconi Calcinabili da fusione in plexiglas base CromoCobalto :

I monconi calcinabili in plexiglas base Cromo Cobalto sono disponibili rotanti e non rotanti, sono preformati e devono essere modificati nella forma definitiva mediante fusione.

Destinati all'utilizzo da parte dell'odontotecnico.

Specifiche Tecniche:

- Il prodotto viene fornito già decontaminato per abbattere la carica microbiologica
- Il prodotto è MONOUSO
- Fornito in confezione singola NON STERILE., sterilizzare la vite passante corta e il manufatto finale in autoclave dall'utilizzatore prima dell'uso
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e a temperatura ambiente avendo cura di mantenere integra la confezione.

Aspetto	Solido
Colore	Grigio metallico
Proprietà fisiche e meccaniche	
Odore	Inodore
Intervallo di fusione	1.310-1.330°C
Temperatura di colata	1.450°C
Densità	8.8 g/cm ³
Carico di rottura (mpa)	700 mpa
Carico di snervamento rp 0,2%	580 mpa
Modulo di elasticità	210 mpa
Allungamento percentuale A%	8%
Riduzione di area %	10%
Durezza vickers Hv 30	300
Composizione elementare in peso	
Cromo (Cr)	22%
Molibdeno (mo)	6.5%
Tungsteno (W)	6%
Cobalto (Co)	63%

COMPONENTS

Elements from melting Plexiglass :

Plexiglass castable are available rotating and no rotating, are preformed and must be modified in the final form by fusion . Intended for use by the dental.

Technical Specifications:

- Product Plexiglas, ideal material because no residue during melting.
- The product is supplied decontaminated to reduce the microbial load
- The product is DISPOSABLE
- Supplied in single pack with screw, NO STERILE. Sterilize the abutment screw and the final product in autoclave by the doctor before using it on the implant
- Store in a dry place at room temperature taking care to maintain package intact.

Elements from melting Plexiglass CrCo base :

Plexiglass castable CrCo base are available rotating and no rotating, are preformed and must be modified in the final form by fusion . Intended for use by the dental.

Technical Specifications:

- The product is supplied decontaminated to reduce the microbial load
- The product is DISPOSABLE
- Supplied in single pack NO STERILE, sterilize the short abutment screw and the final product in autoclave by the doctor before using
- Store in a dry place at room temperature taking care to maintain package intact.

Appearance	Solid
Color	Grey metallic
Physical and mechanical properties	
Odor	Odorless
Smell	
Melting range	1.310-1.330°C
Casting temperature	1.450°C
Density	8.8 g/cm ³
Tensile strength (mpa)	700 mpa
Yield strength rp 0.2%	580 mpa
Modulus of elasticity	210 mpa
Percentage elongation A%	8%
Reduction of area%	10%
Vickers hardness Hv 30	300
Elemental composition by weight	
Chrome (Cr)	22%
Molybdenum (mo)	6.5%
Tungsten (W)	6%
Cobalt (Co)	63%

COMPONENTI

Viti protesiche :

utilizzate per fissare la protesi all'impianto in forma definitiva

Specifiche Tecniche:

- Prodotte in Titanio Grado 5 per garantire un'ottima resistenza al carico masticatorio.
- Il prodotto viene fornito già decontaminato per abbattere la carica microbiologica
- Disponibili in due lunghezze, corte per le protesi definitive, lunghe per i monconi da impronta.
- Sono incluse all'interno della confezione dei monconi protesici, da impronta ed elementi da fusione in plexiglas e CrCo.
- Fornite anche in confezioni multiple NON STERILE, da sterilizzare in autoclave dall'utilizzatore.
- Per le istruzioni di avvitamento fare riferimento a quanto descritto nella sezione "Viti protesiche" del catalogo prodotti.
- Il prodotto è MONOUSO.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e a temperatura ambiente avendo cura di mantenere integra la confezione

Analoghi da laboratorio :

utilizzati come replica dell'impianto dentale in fase di realizzazione della protesi

Specifiche Tecniche:

- Prodotto in Acciaio
- Il prodotto viene fornito già decontaminato per abbattere la carica microbiologica
- Fornito confezione singola NON STERILE,
- Il prodotto è MONOUSO.

Transfer da impronta :

utilizzati per rilevare l'impronta per la realizzazione della protesi

Specifiche Tecniche:

- Prodotto in Acciaio
- Il prodotto viene fornito già decontaminato per abbattere la carica microbiologica
- Il prodotto viene fornito di vite lunga
- Fornito in confezione singola NON STERILE,
- Il prodotto è MONOUSO.

COMPONENTS

Prothetical screws:

used to secure the prosthesis implant in final form

Technical Specifications:

- Produced in Grade 5 titanium to ensure excellent resistance to chewing load.
- The product is supplied decontaminated to destroy the microbiological burden
- Available in two lengths, short for the final prosthesis, long for the stumps impression.
- Included in the package of the prosthetic abutments, impression and elements from casting plexiglas and gold.
- Also supplied in multiple packs NO STERILE, to sterilize in autoclave by the doctor before using
- For screwing instructions, refer to the description in the "Prosthetic Screws" section of the product catalog
- The product is DISPOSABLE
- Store in a dry place at room temperature taking care to maintain package intact.

Laboratory analog :

Used as a replication of the dental implant during prosthetic construction

Technical Specifications:

- Produced in Steel
- The product is supplied decontaminated to destroy the microbiological burden
- Supplied in single pack NO STERILE
- The product is DISPOSABLE

Imprint transfert :

Used to detect the imprint for the realization of the dental prosthesis


Technical Specifications:

- Produced in Steel
- The product is supplied decontaminated to destroy the microbiological burden
- The product supplied with long screw
- Supplied in single pack NO STERILE
- The product is DISPOSABLE

Componenti / Components	Materiale Material	Sterile Sterile	Confezione Package	
VITI DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	TiTi GR.5	NO	SINGOLA SINGLE	
ANALOGHI DA LABORATORIO LABORATORY ANALOG	ACCIAIO STEEL	NO	SINGOLA SINGLE	
MONCONI CALCINABILI MELTING ABUTMENT	PLEXIGLASS	NO	SINGOLA INCLUSA DI VITE SINGLE INCLUDING SCREW	
MONCONI DRITTI, ANGOLATI, PROVVISORI, ESTETICI STRAIGHT AND ANGLED ABUTMENT, TEMPORARY AND AESTHETIC	TiTi GR.5	NO	SINGOLA INCLUSA DI VITE SINGLE INCLUDING SCREW	
TRANSFERT	ACCIAIO STEEL	NO	SINGOLA INCLUSA DI VITE SINGLE INCLUDING SCREW	
VITI PASSANTI ABUTMENT SCREW	TiTi GR.5	NO	10 PZ 10 PIECES	

AZIENDA / COMPANY	DIAMETRO DIAMETER	CODICE CODE	FILETTATURA THREAD	SERRAGGIO TIGHTENING	DRIVER DRIVER
ASTRA TECH®	ø 3,0 ø 3,5/4,0 ø 4,5/5,0	DP-13/A3 DP-13/A4 DP-13/A5	M1,4 M1,6 M2,0	15Ncm 20Ncm 25Ncm	1,27
BIOMAX 3i®	ø 3,25/4,0/5,0	DP-13	M2,0	25Ncm	1,20
BIOMAX 3i® CERTAIN®	ø 3,25/4,1/5,0	DP-13C	M1,6	20Ncm	1,20
CAMLOG®	ø 3,8/4,3	DP-13CA4	M1,6	20Ncm	1,20
FRIALIT XIVE®	ø 3,4/3,8/4,5	DP-13FR	M1,6	20Ncm	1,20
GLOBAL®	ø 3,8/4,3	DP-13G	M1,8	25Ncm	1,27
LIFECORE® PRIMA CONNEX®	ø 3,5/4,1/5,0	DP-13LF	M1,8	25Ncm	Quadro
NEOSS®	ø 4,1	DP-13NE	M2,0	25Ncm	TORX
NOBEL ACTIVE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NA3 DP-13NA4	M1,6 M2,0	20Ncm 25Ncm	TORX
NOBEL BRANEMARK®	ø 3,50 ø 4,0 ø 5,0	DP-13NT DP-13T DP-13WT	M1,6 M2,0 M2,5	20Ncm 25Ncm 35Ncm	TORX
NOBEL REPLACE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NRT DP-13RT	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	TORX
PREMIUM KOHNO®	ø 3,3/3,8 ø 4,25/5,0	DP-13K3 DP-13K4	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	1,27
SCREW-VENT®	ø 3,3 ø 3,5/4,5	DP-13MS3 DP-13I	M1,6 M1,8	20Ncm 25Ncm	1,27
STRAUMANN® BONE LEVEL®	ø 3,3/4,7	DP-13BOL	M1,6	20Ncm	TORX
STRAUMANN® TISSUE LEVEL	ø 4,8	MAXX5016	M2,0	25Ncm	TORX
WINSIX®	ø 3,3/3,8/4,5	DP-13WIN	M2,0	25Ncm	TORX

AZIENDA / COMPANY	DIAMETRO DIAMETER	CODICE CODE	FILETTATURA THREAD	SERRAGGIO TIGHTENING	DRIVER DRIVER
Viti Mua Angolati					
BIOMAX 3i® CERTAIN®	ø 3,25/4,1	DP-13C-MUA	M1,6	20Ncm	1,20
NOBEL ACTIVE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NA3/MU DP-13NA4/MU	M1,6 M2,0	20Ncm 25Ncm	TORX
NOBEL BRANEMARK®	ø 4,1	DP-77/D	M2,0	25Ncm	TORX
NOBEL REPLACE®	ø 3,5 ø 4,3/5,0	DP-13NT/MU DP-13RT/MU	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	TORX
PREMIUM KOHNO®	ø 3,8 ø 4,25	DP-13K3-MUA DP-13K4-MUA	M1,8 M2,0	25Ncm 25Ncm	1,27
SCREW-VENT®	ø 3,5	DP-13I-MUA	M1,8	25Ncm	1,27
Viti Sovrastrutture Mua					
ASTRA TECH®	ø 3,5/4,0/4,5/5	DP-13/A MUA	M1,4	15Ncm	1,27
3i® CERTAIN®	ø 3,25/4,1				
NOBEL BRANEMARK®	ø 3,5/4,0				
NOBEL REPLACE®	ø 3,5/4,3	DP-77/T	M1,4	15Ncm	TORX
SCREW-VENT®	ø 3,5				
PREMIUM KOHNO®	ø 3,8/4,25	DP-13KV	M1,4	15Ncm	1,27

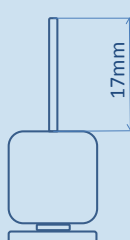IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	ESAGONO HEXAGON	LUNGHEZZA LENGHT	MATERIALE MATERIAL	CONFEZIONAMENTO PACKAGING
DRIVER CORTO / SHORT DRIVER 	DP-39/C	0,9		KLEINOX 4197	CONF. 1PZ
	DP-39	1,20			
	DP-39/A	1,27			
	DP-39/T	TORX			
DRIVER LUNGO / LONG DRIVER 	DP-39/CL	0,9			
	DP-39/B	1.20			
	DP-39/D	1.27			
	DP-39/TL	TORX			
DRIVER MUA ANGOLATI / ANGLED MUA DRIVER 	DP-49 MUA/A	1.4	25 mm		
DRIVER MUA DRITTI / STRAIGHT MUA DRIVER 	DP-49 DR-MUA	1.4	18 mm		

Linee implantari Implants	Diametri Diameter	Driver Driver		
ONE - SG	ø 3.3 ø 3.75 / 4.0 / 5.0	TORX 1.20		
S.INN	ø 3.0 / 3.75 / 4.2 / 5.0	1.27		
KO.INN	ø 3.8 / 4.25	1.27		
TWO	ø 3.3 / 3.75 / 4.2 / 4.70	1.27		
ACTIVE	ø 3.8 / 4.3	1.27		
EVOC	ø 3.5 / 4.3 / 5.0	TORX		


IMPIANTI DENTALI COMPATIBILI

COMPATIBLE DENTAL IMPLANTS



ONE

esagono esterno
external hex

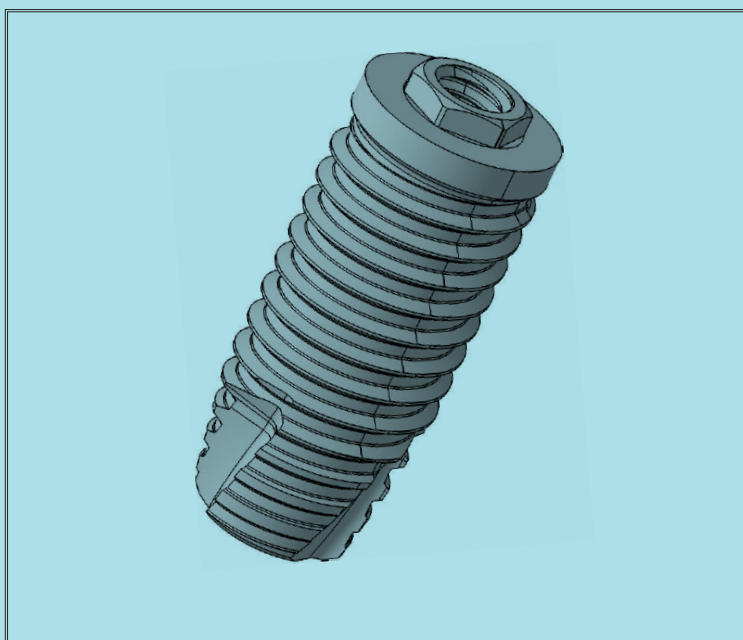

PROPRIETÀ

FORMA CILINDRICA
SUPERFICIE RUVIDA
COLLO LAVORATO
SPIRA LARGA

- Proprietà autocondensante e alta stabilità primaria.
- Veloce e facile inserimento grazie alla spira a 2 principi.
- Miglior controllo durante l'inserimento dell'impianto.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche
- Eccellente in tutti i tipi di osso

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

CYLINDRICAL FORM
ROUGH SURFACE
WORKED NECK
WIDE LOOP

- Property autocondensante and high primary stability.
- Fast and easy insertion thanks to the 2-loop principles.
- Better control during implant insertion.
- Suitable for all surgical procedures
- Excellent in all types of bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



	Compatibile 3i® e Branemark® 3i® and Branemark® Compatible			Compatibile 3i® Compatible 3i®
Lunghezza Lenght	Ø 3,30 codice/code	Ø 3,75 codice/code	Ø 4,0 codice/code	Ø 5,0 codice/code
7	---	---	ONE4007	---
8	---	ONE3708	ONE4008	ONE5008
10	ONE3310	ONE3710	ONE4010	ONE5010
11,5	ONE3311	ONE3711	ONE4011	ONE5011
13	ONE3313	ONE3713	ONE4013	ONE5013
15	---	ONE3715	---	---


Accessori protesici compatibili guardare a pag. 47-71

Compatible prosthetic accessories see page 47-71

S.G.

esagono esterno

external hex

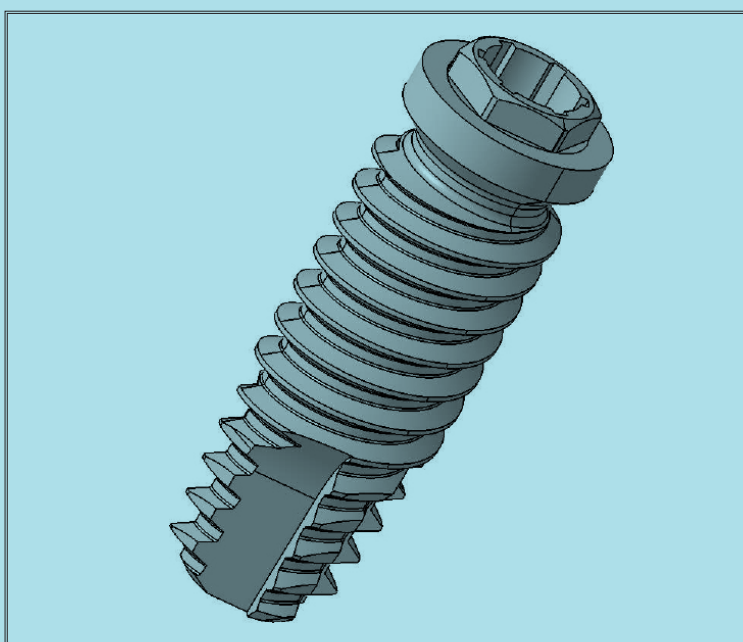

PROPRIETÀ

FORMA CILINDRICA
SUPERFICIE RUVIDA
COLLO LAVORATO
SPIRA LARGA

- Proprietà autocondensante e alta stabilità primaria.
- Veloce e facile inserimento grazie alla spira a 2 principi.
- Miglior controllo durante l'inserimento dell'impianto.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche
- Eccellente in tutti i tipi di osso

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare


PROPERTY

CYLINDRICAL FORM
ROUGH SURFACE
WORKED NECK
WIDE LOOP

- Property autocondensante and high primary stability.
- Fast and easy insertion thanks to the 2-loop principles.
- Better control during implant insertion.
- Suitable for all surgical procedures
- Excellent in all types of bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport

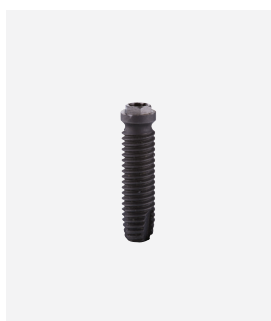


	Compatibile Branemark®/ Branemark® compatible		
Lunghezza Lenght	Ø 3,30 codice/code	Ø 3,75 codice/code	Ø 4,0 codice/code
8	---	---	SG4008
10	SG3310	SG3710	SG4010
11,5	SG3311	SG3711	SG4011
13	---	SG3713	SG4013
15	---	SG3715	SG4015
18	---	SG3718	SG4018

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 47-71

Compatible prosthetic accessories see page 47-71

ACTIVE

esagono interno
internal hex

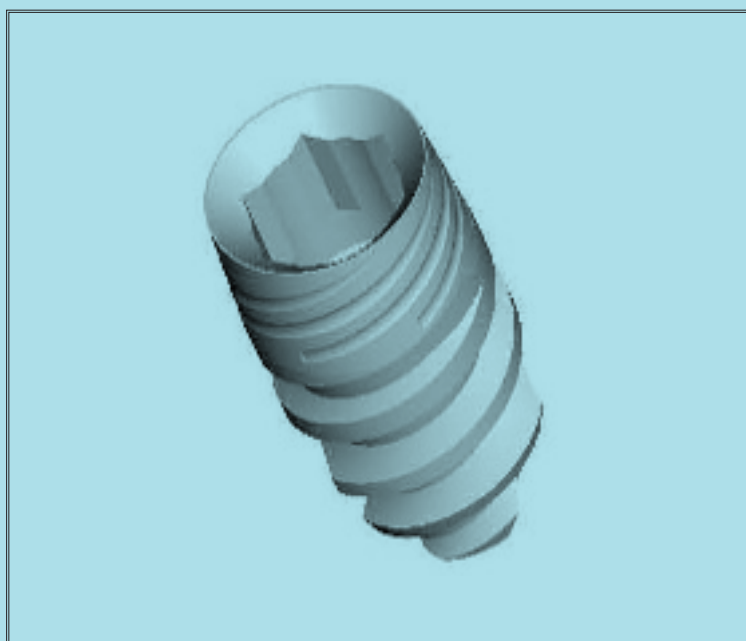

PROPRIETÀ

FORMA CILINDRICA
SUPERFICIE RUVIDA
COLLO LAVORATO
SPIRA LARGA

- Proprietà autocondensante e alta stabilità primaria.
- Veloce e facile inserimento grazie alla spira a 2 principi.
- Miglior controllo durante l'inserimento dell'impianto.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche
- Eccellente in tutti i tipi di osso

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

CILYNDRICAL FORM
ROUGH SURFACE
WORKED NECK
WIDE LOOP

- Property autocondensante and high primary stability.
- Fast and easy insertion thanks to the 2-loop principles.
- Better control during implant insertion.
- Suitable for all surgical procedures
- Excellent in all types of bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



Compatibile AlphaBio® / AlphaBio®compatible


Lunghezza Lenght	ø 3,80 codice/code	ø 4,30 codice/code
8	AC3808	AC4308
10	AC3810	AC4310
11,5	AC3811	AC4311
13	AC3813	AC4313

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 86

Compatible prosthetic accessories see page 86

KO.INN

esagono interno
internal hex

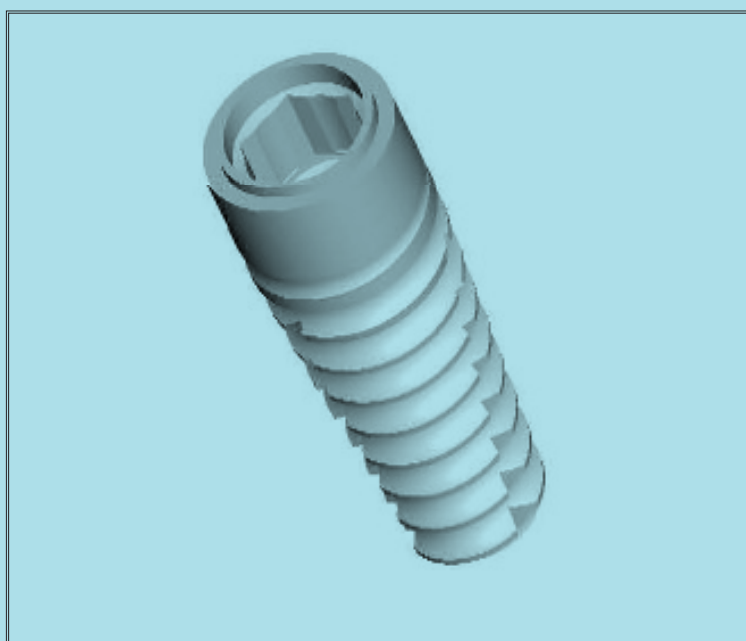

PROPRIETÀ

FORMA CILINDRICA
SUPERFICIE RUVIDA
COLLO LAVORATO
SPIRA LARGA

- Proprietà autocondensante e alta stabilità primaria.
- Veloce e facile inserimento grazie alla spira a 2 principi.
- Miglior controllo durante l'inserimento dell'impianto.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche
- Eccellente in tutti i tipi di osso

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

CYLINDRICAL FORM
ROUGH SURFACE
WORKED NECK
WIDE LOOP

- Property autocondensante and high primary stability.
- Fast and easy insertion thanks to the 2-loop principles.
- Better control during implant insertion.
- Suitable for all surgical procedures
- Excellent in all types of bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



Compatibile KOHNO® / KOHNO®compatible


Lunghezza Lenght	Ø 3,80 codice/code	Ø 4,25 codice/code
8	KO3808	KO4208
10	KO3810	KO4210
11,5	KO3811	KO4211
13	KO3813	KO4213

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 81

Compatible prosthetic accessories see page 81

S.INN

esagono interno
internal hex

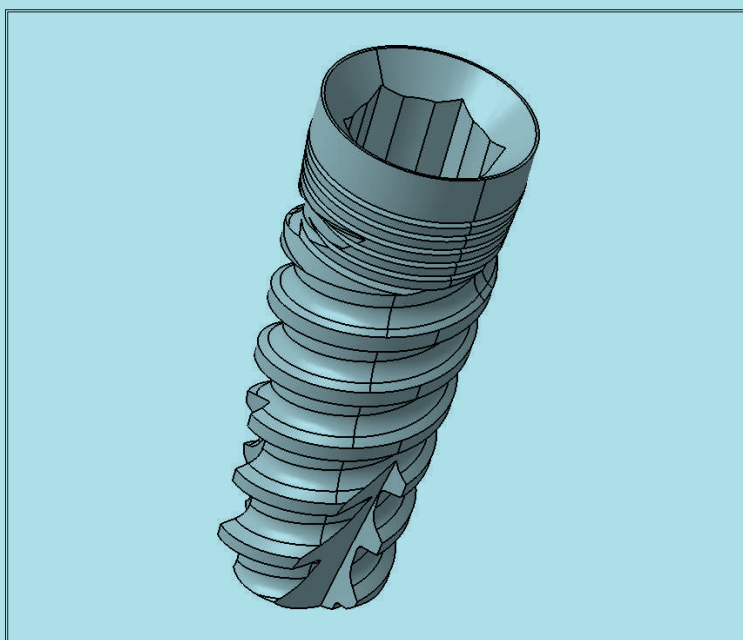

PROPRIETÀ

FORMA CONICA
SUPERFICIE RUVIDA
COLLO LAVORATO
SPIRA LARGA

- Proprietà autocondensante e alta stabilità primaria.
- Veloce e facile inserimento grazie alla spira a 2 principi.
- Miglior controllo durante l'inserimento dell'impianto.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche
- Eccellente in tutti i tipi di osso

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

CONICALFORM
ROUGH SURFACE
WORKED NECK
WIDE LOOP

- Property autocondensante and high primary stability.
- Fast and easy insertion thanks to the 2-loop principles.
- Better control during implant insertion.
- Suitable for all surgical procedures
- Excellent in all types of bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



	Compatibile MIS® Seven®/ MIS® Seven® compatible			
Lunghezza Lenght	Ø 3,30 codice/code	Ø 3,75 codice/code	Ø 4,20 codice/code	Ø 5,0 codice/code
8	---	S.INN3708	S.INN4208	S.INN5008
10	S.INN3310	S.INN3710	S.INN4210	S.INN5010
11,5	S.INN3311	S.INN3711	S.INN4211	S.INN5011
13	S.INN3313	S.INN3713	S.INN4213	S.INN5013
15	---	S.INN3715	---	---


Accessori protesici compatibili guardare a pag. 86

Compatible prosthetic accessories see page 86

TWO

esagono interno

internal hex

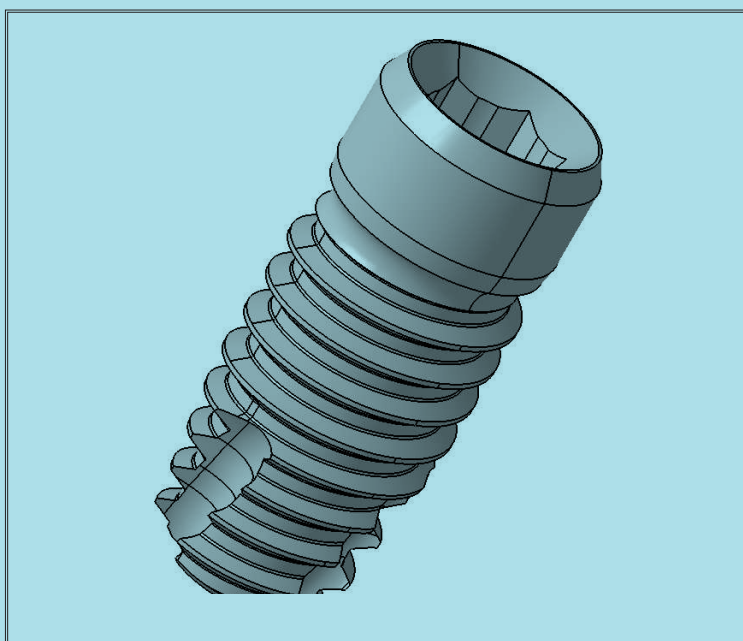

PROPRIETÀ

FORMA CILINDRICA
SUPERFICIE RUVIDA
COLLO LAVORATO
SPIRA MEDIA

- Proprietà autocondensante e alta stabilità primaria.
- Veloce e facile inserimento grazie alla spira a 2 principi.
- Miglior controllo durante l'inserimento dell'impianto.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche
- Eccellente in tutti i tipi di osso

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

CYLINDRICAL FORM
ROUGH SURFACE
WORKED NECK
MEDIUM LOOP

- Property autocondensante and high primary stability.
- Fast and easy insertion thanks to the 2-loop principles.
- Better control during implant insertion.
- Suitable for all surgical procedures
- Excellent in all types of bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium mounter used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport




	Compatibile Screw-Vent® / Screw-Vent® compatible			
Lunghezza Lenght	ø 3,30 codice/code	ø 3,75 codice/code	ø 4,20 codice/code	ø 4,70 codice/code
8	---	TWO3708	TWO4208	TWO4708
10	TWO3310	TWO3710	TWO4210	TWO4710
11,5	TWO3311	TWO3711	TWO4211	TWO4711
13	TWO3313	TWO3713	TWO4213	TWO4713

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 86

Compatible prosthetic accessories see page 86

EVOC

trilobato interno
internal trilobe

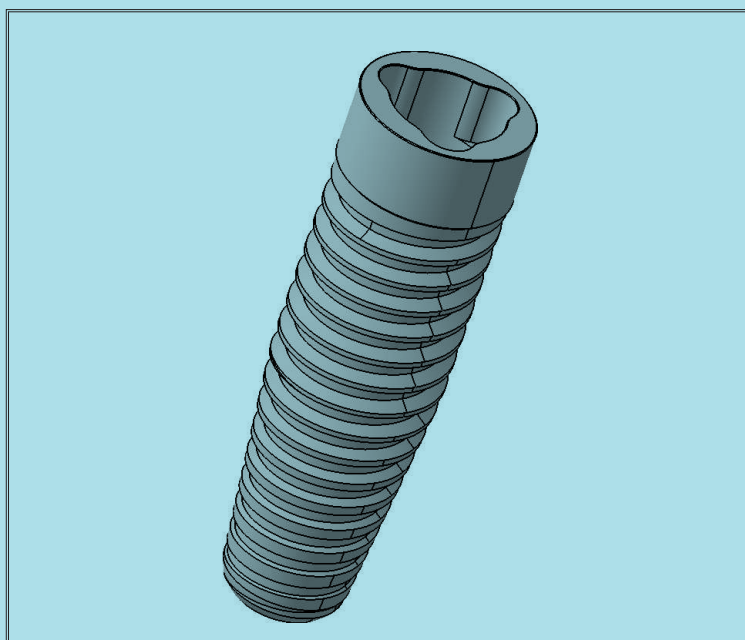

PROPRIETÀ

FORMA CILINDRICA
SUPERFICIE RUVIDA
COLLO LAVORATO
SPIRA MEDIA

- Proprietà autocondensante e alta stabilità primaria.
- Veloce e facile inserimento grazie alla spira a 2 principi.
- Miglior controllo durante l'inserimento dell'impianto.
- Adatto a tutte le procedure chirurgiche
- Eccellente in tutti i tipi di osso

Ogni confezione è composta da:

- Una busta alluminio contenente l'impianto con montatore in titanio utilizzabile come transfert o moncone definitivo.
- Una vite tappo
- Un foglietto illustrativo
- Etichetta paziente da applicare al passaporto implantare

PROPERTY

CYLINDRICAL FORM
ROUGH SURFACE
WORKED NECK
MEDIUM LOOP

- Property autocondensante and high primary stability.
- Fast and easy insertion thanks to the 2-loop principles.
- Better control during implant insertion.
- Suitable for all surgical procedures
- Excellent in all types of bone

Each package consists of:

- An aluminum envelope containing the implant with titanium moulder used as a transfer or final abutment.
- A screw cap
- A leaflet
- Patient label to apply to the implant passport



	Compatibile Nobel Replace® / Nobel Replace® compatible		
Lunghezza Lenght	ø 3,50 codice/code	ø 4,30 codice/code	ø 5,0 codice/code
8	EVOC3508	---	EVOC5008
10	EVOC3510	EVOC4310	---
11,5	EVOC3511	EVOC4311	---
13	---	EVOC4313	---
15	EVOC3515	---	---

Accessori protesici compatibili guardare a pag. 76

Compatible prosthetic accessories see page 76



							
	Fresa lancia <i>Lance cutter</i>	Fresa Pilota <i>Pilot drill</i>	Fresa 3.00 <i>Drill 3.00</i>	Fresa 3.50 <i>Drill 3.50</i>	Fresa f 4.00 <i>Drill 4.00</i>	Fresa 4.50 <i>Drill 4.50</i>	Fresa 5.00 <i>Drill 5.00</i>
Diametro <i>Diameter</i>	ø reale <i>ø real</i>	ø 2.20	ø 2.60	ø 3.10	ø 3.60	ø 4.10	ø 4.60

COMPATIBILITÀ SEQUENZA CHIRURGICA
COMPATIBILITY SURGICAL SEQUENCE

IMPIANTI DENTAL PLANET <i>IMPLANTS DENTAL PLANET</i>	COMPATIBILITÀ <i>COMPATIBILITY</i>
ONE	NOBEL BRK® esagono esterno / <i>external hex</i>
TWO	SCREW-VENT® esagono interno / <i>internal hex</i>
EVOC	NOBEL REPLACE® trilobato interno / <i>trilob internal</i>
KO-INN	SWEDEN KOHNO® esagono interno / <i>internal hex</i>
SG	NOBEL BRK® esagono esterno / <i>external hex</i>
S-INN	MIS® SEVEN® esagono interno / <i>internal hex</i>
ACTIVE	ALPHA BIO® esagono interno / <i>internal hex</i>

ACCESSORI ACCESSORIES	CODICE CODE
STOP FRESE / DRILLS STOP 	L. 8 - L. 10 - L.11 - L. 13 - L. 15
CRICCHETTO/ RATCHET 	CRF-6
PROLUNGA PER CRICCHETTO/ EXTENSION FOR RATCHET 	DP-93
INSERITORE DA MANIPOLO / INSERT FOR CONTRA-ANGLE 	DP-93/A
ALLUNGATORE CHIRURGICO / SURGICAL EXTENDER 	AIP-1
CHIAVE DA CONTRANGOLO / CONTRA-ANGLE KEY 	1,20 1,27 TORX

NOVOCOR PLUS

NOVOCOR PLUS brevettato da B&B Dental è un materiale naturale da innesto osseo, costituito da granuli di corallo naturale che può essere impiegato nella riparazione dei difetti ossei nel settore ortopedico.

In particolare in odontostomatologia è utilizzato come riempitivo in seguito ad interventi di implantologia.

PROPRIETÀ

- Materiale naturale da innesto osseo.
- Riassorbimento lento ed integrazione diretta da formazione di nuovo osso.
- Stabilità dimensionale a lungo termine.
- Osteoconduttiva.
- 100% minerale.
- Nessun corpo estraneo o reazioni infiammatorie.
- Assorbimento di superficie idrofila e ottimale adesione cellulare.
- Sicuro e sterile.
- Facile da applicare.

APPLICAZIONI CLINICHE

- Rialzo del seno mascellare
- Aumento orizzontale
- Difetti intraosseo
- Difetti Peri-implantare
- Alveoli da estrazione
- Aumento verticale
- Difetti delle forcazioni

CONFEZIONAMENTO

Ogni confezione contiene 4 capsule da 0,5 grammi di prodotto.
Granulometria 0,2 – 0,5 mm

NOVOCOR PLUS

NOVOCOR PLUS patented by B&B Dental is a natural grafting material (100% mineral), made from natural coral granules useful for the repair of bone defects in the orthopedic sector. In particular in odontostomatology it is used as a filler for implant sites after the placement of dental implants

CHARACTERISTICS

- Natural coral grafting material (100% mineral).
- Slow resorption and direct integration of new bone.
- Long-term dimensional stability.
- Osteoconductive.
- No foreign body or inflammatory reaction.
- Hydrophilic surface, optimal cell adhesion and blood absorption.
- Safe and sterile.
- Easy handling.

CLINICAL APPLICATIONS

- Sinus lift.
- Horizontal augmentation.
- Intraosseous defects.
- Peri-implant defects.
- Extraction sockets.
- Vertical augmentation.
- Furcation defects.

PACKAGING

Each box contains 4 capsules from 0.5 g.
Grain size: 0.2 – 0.5 mm.



T-BARRIER MEMBRANE IN COLLAGENE

Le membrane T-BARRIER in collagene sono in collagene equino di tipo 1 perfettamente biocompatibile e riassorbibile. Sono indicate per procedure di rigenerazione tissutale guidata, promuovendo una veloce guarigione del sito in cui vengono applicate.

PROPRIETÀ

- Perfetta biocompatibilità.
- Riassorbimento totale dopo 4/6 mesi.
- Attività osteoconduttiva e osteoinduttiva.
- Capacità antinfiammatoria, eutrofica e cicatrizzante.
- Facili da applicare nel sito del difetto.

APPLICAZIONI CLINICHE

Chirurgia orale: azione di contenimento (effetto tenda) per innesto di materiali eterologhi e autologhi.
Paradontologia: trattamento di recessione gengivale.
Implantologia: protezione della membrana sinusale prima dell'inserzione del materiale da innesto.

CONFEZIONAMENTO

Ogni confezione contiene 2 membrane.
Dimensioni: 23×23 mm
Spessore: 0,25 mm

T-BARRIER COLLAGENE MEMBRANES

T-BARRIER collagen membranes are made from type-1 native heterologous equine collagen, which ensures perfect biocompatibility and complete resorption. They are indicated for guided tissue regeneration procedures and are applied to enhance the healing of operation sites .

CHARACTERISTICS

- Perfect biocompatibility.
- Complete resorption after 4/6 months.
- Osteoconductive and osteoinductive activity.
- Anti-inflammatory, eutrophic and cicatrizing properties.
- Easy to apply on the defect area.

CLINICAL APPLICATIONS

Oral surgery: containment action (tent effect) for heterologous and autologous grafts.
Paradontology: treatment of gum recessions.
Implantology: protection of the sinus membrane prior to insertion of graft material.

PACKAGING

Each box contains two membranes.
Dimension: 23×23 mm.
Thickness: 0.25 mm.



T-BARRIER MEMBRANE IN TITANIO

Sviluppate da B&B Dental le T-Barrier Titanio sono membrane in titanio commercialmente puro di grado 2, non riassorbibili, microperforate e risultano essere uno dei mezzi efficaci per la rigenerazione ossea guidata, in particolare per la stabilizzazione nonché protezione del materiale innestato nel difetto osseo

PROPRIETÀ

- Perfetta biocompatibilità.
- Facili da applicare nel sito del difetto.
- Facili da tagliare.

APPLICAZIONI CLINICHE

Le griglie sono indicate in tutti i casi di rigenerazione ossea guidata, specialmente in prospettiva di una successiva riabilitazione con impianti intraossei. Esse possono essere utilizzate sia negli archi dentali superiori che inferiori di pazienti con difetti ossei che limitano o escludono la possibilità di trattamenti implantari.

CONFEZIONAMENTO

Sono fornite in blister atossici, apirogeni e sterili. Ogni confezione contiene due membrane. Dimensioni: 24x29mm. Spessore: 0,13 mm.

T-BARRIER TITANIUM MEMBRANES

Developed by B&B Dental T-Barrier Titanium are membranes Grade 2 commercially pure titanium, non-absorbable and micro-perforated and they represent one of the most effective solutions for guided bone regeneration, especially for the stabilization and protection of graft material in a bone defect .

CHARACTERISTICS

- Perfect biocompatibility.
- Easy to apply on the defect area.
- Easy to cut.

CLINICAL APPLICATIONS

The grid is indicated in all cases of guided bone regeneration, especially in view of a subsequent rehabilitation with intraosseous implants. It can be used in both upper and lower dental arch of patients with bone defects that limit or exclude the possibility of implantology treatments.

PACKAGING

They are supplied in blister packs, non-toxic, non-pyrogenic and sterile. Each pack contains two membranes. Dimensions: 24x29 mm. Thickness: 0,13 mm.



Ref.005322

T-BARRIER MEMBRANE IN TITANIO

MEMBRANE DOLL

- Servono per la rigenerazione guidata dell'osso.
- Sono facilmente ritagliabili e modellabili sul difetto.
- Vengono evitate le viti osteosintesi laterali difficili da utilizzare in presenza di denti vicini.



Ref. 00532/3



Ref. 00532/4



Ref. 00532/5



Ref. 00532 SCREW

SAFETY IMPLANT MEMBRANE

Evitano la migrazione dell'impianto nel seno mascellare grazie al bloccaggio dell'impianto stesso con la membrana.



Ref. 00532/10



Ref. 00532/1




Ref. 00532/2




Ref. 00532 SCREW

VITI OSTEOSINTESI


Le viti osteosintesi si caratterizzano per avere un filetto altamente tagliente che permette un facile avvitaamento. Sono dotate di un'impronta a croce sulla testa per mantenere accoppiate la vite e sua specifica chiave.

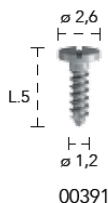

00391

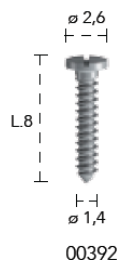

00392

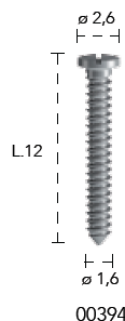

00394



00396

OSTEOSYNTHESIS SCREW

Osteosynthesis screws feature a highly-penetrating thread allowing for easy screw insertion and a cross-slotted head for holding the screw in engagement with the screwdriver shaft.

ACCESSORI COMPATIBILI

COMPATIBLE ACCESSORIES

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

ASTRA TECH[®]



Altre compatibilità:
other compatibility:

GEASS[®]WAY[®] MILANO

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,0 Codice /Code	ø 3,5/4,0 Codice /Code	ø 4,5/5,0 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOG	AT30A	AT35A	AT45A	
	TRANSFER / TRANSFER	AT30CO	AT35TL	AT45TL	
	VITE DI GUARIGIONE ø 4,5 HEALING ABUTMENT ø 4,5				
	H.2	AT30VG2	AT35VG2	---	
	H.4	AT30VG4	AT35VG4	---	
	H.6	---	AT35VG6	---	
	VITE DI GUARIGIONE ø 5,5 HEALING ABUTMENT ø 5,5				
	H.2	---	AT35VG52	AT45VG2	
	H.4	---	AT35VG54	AT45VG4	
	H.6	---	AT35VG56	AT45VG6	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	AT35MT-1	AT45MT-1	
	H.2	---	AT35MT-3	AT45MT-3	
	FRESABILE	AT30MT-F	AT35MT7-F	AT45MT7-F	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	AT30MT15	AT35MT15-2	AT45MT15-2	
	15° H.3	---	AT35MT15-3	AT45MT15-3	
	25° H.2	---	AT35MT25	AT45MT25	
	VITE / SCREW	DP-13/A3	DP-13/A4	DP-13/A5	


Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,0 Codice /Code	ø 3,5/4,0 Codice /Code	ø 4,5/5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT NON ROTANTE / NO ROTATING	AT30PROV	AT35PROV	AT45PROV	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING NON ROTANTE / NO ROTATING	AT30CI	AT35CI	AT45CI	
	CALCINABILE / CASTABLE NON ROTANTE / NO ROTATING	---	AT35CA	AT45CA	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE NON ROTANTE / NO ROTATING	---	AT35CR	AT45CR	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.0 Codice /Code	ø 3,5/4,0 Codice /Code	ø 4,5/5,0 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	---	AT20°AN-UA	AT20°AN-UA	
	TRANSFER / TRANSFER	---	AT20°CO-UA	AT20°CO-UA	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	---	AT20°CAP-UA	AT20°CAP-UA	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.0,5	---	AT35UA-0,5	AT45UA-0,5	
	H.1	---	AT35UA-1,0	AT45UA-1,0	
	H.2	---	AT35UA-2,0	AT45-2,0	
	H.4	---	AT35UA-4,0	---	
	MONCONI PROVVISORI TEMPPORAY ABUTMENT	---	AT20°PROV-UA	AT20°PROV-UA	
	CALCINABILE / CASTABLE	---	AT20°CA-UA	AT20°CA-UA	
	VITE / SCREW	---	DP-13/A MUA	DP-13/A MUA	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

BIOMET 3i[®]

esagono esterno

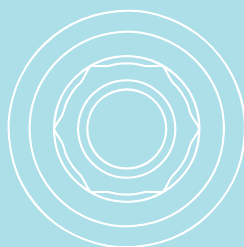

Altre compatibilità:
other compatibility:

BTI[®]
BIOLOK[®]
BIOTEC[®]
INTRALOCK[®]
MY IMPLANT[®]
P1H[®]
SOUTHERN[®]
SWEDEN & MARTINA OUTLINK[®] RP

DENTAL PLANET Sas web-site: www.dental-planet.it e-mail: info@dental-planet.it

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,25 Codice /Code	ø 3,75/4,0 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	--- ---	DP-106/A DP-106	--- ---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	--- ---	BRK41CI-R BRK41CI	--- ---	
	CALCINABILE / CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	--- C325I	DP-12 DP-12/A	DP-45/A DP-45	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE				
	ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING	--- ---	BRK41CR-R BRK41CR	--- ---	
	OVERLOC				
	H.1	---	BRK-410/1	---	
	H.2	---	BRK-410/2	---	
	H.3	---	BRK-410/3	---	
	H.4	---	BRK-410/4	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.25 Codice / <i>Code</i>	ø 3,75/4,0 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	---	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	---	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	---	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	LMET10	---	
	H.2	---	LMET20	---	
	H.3	---	LMET30	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	---	LMET17/A	---	
	30° H.3	---	LMET30/A	---	
	VITE / SCREW	---	DP-77/T	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		Ø 3.25 Codice /Code	Ø 3,75/4,0 Codice /Code	Ø 5,0 Codice /Code	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	---	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	---	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENTE FOR BOLDING	---	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	---	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	---	LMCE1-CR	---	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

BIOMET 3i[®] Certain[®]



Accessori / *Accessories*

ø 3,25

Codice /Code

ø 4,1

Codice /Code

ø 5,0

Codice /Code



ANALOGO / ANALOGUE

C3AN3

C3AN4

C3AN5



TRANSFER / TRANSFER

C3CO34

C3CO41

C3CO50



VITE DI GUARIGIONE
HEALING ABUTMENT

H.2

C3VG352

C3VG412

C3VG512

H.4

C3VG354

C3VG414

C3VG514



MONCONI DRITTI
STRAIGHT ABUTMENT

H.2

C3MT3-2

C3MT4-2

C3MT5-2

H.4

C3MT3-4

C3MT4-4

C3MT5-4



MONCONI ANGOLATI
ANGLED ABUTMENT

15° H.2

C3MT3152

C3MT4152

C3MT5152

15° H.4

C3MT3154

C3MT4154



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

ROTANTE / ROTATING

CEPROV34-R

C3PROV41-R

C3PROV50-R

NON ROTANTE / NO ROTATING

C3PROV34

C3PROV41

C3PROV50



VITE / SCREW

DP-13C

DP-13C

DP-13C

Accessori / *Accessories*

Ø 3,25

Codice /Code

Ø 4,1

Codice /Code

Ø 5,0

Codice /Code



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BONDING

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

C3CI34-R

C3CI34

C3CIS41-R

C3CIS41



CALCINABILE / CASTABLE

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

C3CA3-R

C3CA3

C3CA4-R

C3CA4

C3CA5-R

C3CA5



CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

C3CR34-R

C3CR34

C3CR41-R

C3CR41

C3CR50-R

C3CR50



OVERLOC

H.1

H.2

H.3

H.4

C3-340/1

C3-340/2

C3-340/3

C3-410/1

C3-410/2

C3-410/3

C3-410/4

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.25 Codice / <i>Code</i>	ø 4,1 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	C3MU34-1	---	---	
	H.2	C3MU34-2	C3MU41-2	---	
	H.3	C3MU34-3	---	---	
	H.4	---	C3MU41-4	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	C3MU3417	---	---	
	30° H.3	C3MU3430	---	---	
	17° H.3	---	C3MU4117	---	
	30° H.4	---	C3MU4130	---	
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T	---	

Accessori / *Accessories*

ø 3.25

Codice /Code

ø 4,1

Codice /Code

ø 5,0

Codice /Code



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

LEP010

LEP010



PROVVISORIO PER SALDATURA
TEMPORARY FOR WELDING

LEP010-L

LEP010-L



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENTE FOR BOLDING

BRK-S MUA

BRK-S MUA



CALCINABILE
CASTABLE

LMCE1

LMCE1



CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

LMCE1-CR

LMCE1-CR

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

FRIALIT[®] XIVE[®]



Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.40 Codice /Code	ø 3.80 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
	ANALOGO / ANALOGUE	DP-91	DP-91/A	DP-91/B	
	TRANSFER / TRANSFER	CO34	CO38	CO45	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.2	VG34-2	VG38-2	---	
	H.3	VG34-3	VG38-3	VG45-3	
	H.5	VG34-5	VG38-5	VG45-5	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.2	MT34	MT38	MT45	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	MT3415	MT3815	MT4515	
	VITE / SCREW	DP-13FR	DP-13FR	DP-13FR	

Accessori / *Accessories*

ø 3.40

Codice /Code

ø 3.80

Codice /Code

ø 4.50

Codice /Code



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BONDING

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

MT34CI-R

MT34CI

MT38CI-R

MT38CI

MT45CI-R

MT45CI




CALCINABILE / CASTABLE

NON ROTANTE / NO ROTATING

DP-91

DP-91/A

DP-91/B

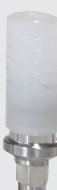

CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

NON ROTANTE / NO ROTATING

MT34CR

MT38CR

MT45CR

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:


LEONE®

Ø 3,30

Codice /Code


Ø 4,1

Codice /Code

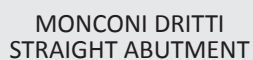

LEO33MT

LEO41MT

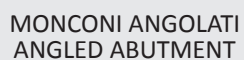

15°

LEO33MTA

LEO41MTA

 25°

LEO33MT25

LEO41MT25

Accessori compatibili con:


Accessories compatible with:

LIFECORE[®]
PRIMA CONNEX[®]

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice /Code	ø 4,10 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
 ANALOGO / ANALOGUE  MONCONE FRESABILIE MILLABLE ABUTMENT  CALCINABILE / CASTABLE ROTANTE / ROTATING NON ROTANTE / NO ROTATING  VITE / SCREW		LF35AN	LF40AN	LF50AN	
		LF35MT	LF40MTT	LF40MTT	
		LF35CAR LF35CA	LF40CR LF40CA	--- LF50CA	
		DP-13LF	DP-13LF	DP-13LF	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NEOSS[®]

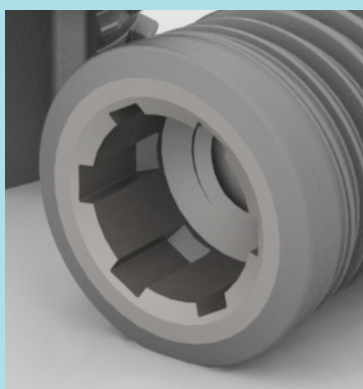

Accessori / *Accessories*

ø 4,10
Codice /Code



ANALOGO / ANALOGUE

DP-79/B



MONCONE FRESABILE
MILLABLE ABUTMENT

NEO41MT-F



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

NEO41PT

NON ROTANTE / NO ROTATING



CALCINABILE / CASTABLE

DP-79

NON ROTANTE / NO ROTATING



VITE / SCREW

DP-13NE

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NOBEL ACTIVE®



Altre compatibilità:
other compatibility:
NOBEL REPLACE® CC

Ø 4,3/5,0

Codice /Code

67

Accessori / *Accessories*

ø 3,50

Codice /Code

ø 4,3/5,0

Codice /Code



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BONDING

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

NA35CI-R

NA35CI

NA43CI-R

NA43CI



CALCINABILE / CASTABLE

ROTANTE / ROTATING


NON ROTANTE / NO ROTATING

NA35CA-R

NA35CA

NA43CA-R

NA43CA

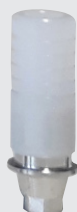

CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING

NA35CR-R

NA35CR

NA43CR-R

NA43CR

OVERLOC



H.1

H.2

H.3

H.4

NA-430/1

NA-430/2

NA-430/4

NA-430/4

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice / <i>Code</i>	ø 4,3/5,0 Codice / <i>Code</i>		
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010		
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010		
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG		
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	NA35MU-1	NA43MU-1		
	H.2	NA35MU-2	NA43MU-2		
	H.3	NA35MU-3	NA43MU-3		
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	NA35MU17	NA43MU17		
	30° H.3	NA35MU30	NA43MU30		
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T		

Accessori / Accessories

ø 3,50

Codice /Code

ø 4,3/5,0

Codice /Code



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

LEP010

LEP010



PROVVISORIO PER SALDATURA
TEMPORARY FOR WELDING

LEP010-L

LEP010-L



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BOLDING

BRK-S MUA

BRK-S MUA



CALCINABILE
CASTABLE

LMCE1

LMCE1




CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

LMCE1-CR

LMCE1-CR

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NOBEL BRANEMARK®

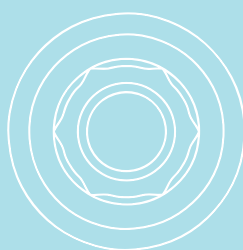



Altre compatibilità:
other compatibility:

BTI®
BIOLOK®
BIOTEC®
INTRALOCK®
MY IMPLANT®
P1H®
SOUTHERN®
SWEDEN & MARTINA OUTLINK® RP

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice / <i>Code</i>	ø 3,75/4,0 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOG	DP-31/A	DP-24	DP-31	
	TRANSFER / TRANSFER	DP-51TSG	DP-36	DP-51WP	
	VITE DI GUARIGIONE CILINDRICA CILINDRICAL HEALING ABUTMENT				
	H.3	---	DP-75	---	
	H.4	---	DP-75/A	---	
	H.5	---	DP-75/B	---	
	VITE DI GUARIGIONE ANATOMICA ANATOMICAL HEALING ABUTMENT				
	H.3	DP-51	DP-78	DP-48	
	H.4	DP-51/A	DP-78/A	DP-48/A	
	H.5	DP-51/B	DP-78/B	DP-48/B	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	DP-50/B	DP-05T/A	---	
	H.2	---	DP-06T/A	DP-50/D	
	H.3	DP-50	DP-07T/A	---	
	H.4	---	DP-08T/A	DP-50/A	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15° H.2	DP-51/15	DP-02T/A	DP-50/15WP	
	25° H.2	---	DP-03T/B	---	
	VITE / SCREW	DP-13NT	DP-13T	DP-13WP	

Ø 5,0

Codice /Code

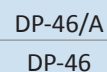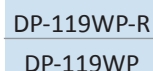

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice / <i>Code</i>	ø 3,75/4,0 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	DP-118	LMET10	---	
	H.2	DP-119	LMET20	---	
	H.3	---	LMET30	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	---	LMET17/A	---	
	30° H.3	---	LMET30/A	---	
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T	---	

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.50 Codice / <i>Code</i>	ø 3,75/4,0 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	LEP010	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	LEP010-L	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENTE FOR BOLDING	BRK-S MUA	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	LMCE1	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	LMCE1-CR	LMCE1-CR	---	

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

NOBEL REPLACE®



Accessori / Accessories

ø 3,50 Codice /Code	ø 4,3 Codice /Code	ø 5,0 Codice /Code	
DP-89/B	DP-89	DP-89/A	
C3CO34	C3CO41	C3CO50	
RPL35VG3 RPL35VG5	RPL43VG3 RPL43VG5	RPL50VG3 RPL50VG5	
RPL35T-1 RPL35T-3	RPL43T-1 RPL43T-3	RPL50T-1 RPL50T-3	
RPL35A15-1 RPL35A15-3	RPL43A15-1 RPL43A15.3	RPL50A15-1 RPL50A15-3	
RPL35PROV-R RPL35PROV	RPL43PROV-R RPL43PROV	RPL50PROV-R RPL50PROV	
DP-13NRT	DP-13RT	DP-13RT	



ANALOGO / ANALOGUE



TRANSFER / TRANSFER



VITE DI GUARIGIONE
HEALING ABUTMENT

H.3

H.5



MONCONI DRITTI
STRAIGHT ABUTMENT

H.1

H.3



MONCONI ANGOLATI
ANGLED ABUTMENT

15° H.1

15° H.3



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

ROTANTE / ROTATING

NON ROTANTE / NO ROTATING



VITE / SCREW

Ø 5,0

Codice / Code



Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,50 Codice / <i>Code</i>	ø 4,3 Codice / <i>Code</i>	ø 5,0 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	LA010	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	LTE010	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	LMEVG	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	RPL35AE1	RPL43AE1	RPL50AE1	
	H.4	RPL35AE4	RPL43AE4	RPL50AE4	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.2	RPL35MU17-2	RPL43MU17-2	---	
	17° H.3	RPL35MU17-3	---	---	
	30° H.3	---	RPL43MU30-3	---	
	VITE / SCREW	DP-77/T	DP-77/T	---	

Accessori / Accessories

ø 3,50

Codice /Code

ø 4,3

Codice /Code

ø 5,0

Codice /Code



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

LEP010

LEP010



PROVVISORIO PER SALDATURA
TEMPORARY FOR WELDING

LEP010-L

LEP010-L



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BOLDING

BRK-S MUA

BRK-S MUA



CALCINABILE
CASTABLE

LMCE1

LMCE1




CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

LMCE1-CR

LMCE1-CR

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

PREMIUM KOHNO®

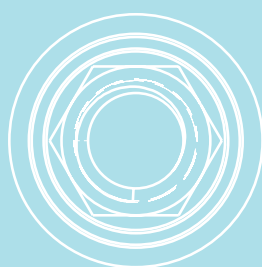

Accessori / *Accessories*

Ø 3.30

Codice /Code

Ø 3.80

Codice /Code

Ø 4.25

Codice /Code

Ø 5.0



ANALOGO / ANALOGUE

KO33AN

KO38AN

KO42AN

KO50AN



TRANSFER / TRANSFER

KO33CO

KO38CO

KO42CO

KO50CO



VITE DI GUARIGIONE
HEALING ABUTMENT

H.2

KO33VG2

KO38VG2

KO42VG2

KO50VG2

H.4

KO33VG4

KO38VG4

KO42VG4

KO50VG4



MONCONI DRITTI
STRAIGHT ABUTMENT

H.1

KO33MT-1

KO38MT-1

KO42MT-1

KO50MT-1

H.2

KO33MT-2

KO38MT-2

KO42MT-2

KO50MT-2

H.4

KO38MT-4

KO42MT-4



MONCONI ANGOLATI
ANGLED ABUTMENT

15° H.1

KO33AG-15

KO50AG-15

15° H.2

KO38AG-15

KO42AG-15

25° H.2

KO38AG-25

KO42AG-25



VITE / SCREW

DP-13K3

DP-13K3

DP-13K4

DP-13K4

Accessori / *Accessories*

ø 3.30

Codice /Code

ø 3.80

Codice /Code

ø 4.25

Codice /Code

ø 5,0

Codice /Code



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

ROTANTE / ROTATING
NON ROTANTE / NO ROTATING

KO33PROV-R
KO33PROV

KO38PROV-R
KO38PROV

KO42PROV-R
KO42PROV

KO50PROV-R
KO50PROV



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BONDING

ROTANTE / ROTATING
NON ROTANTE / NO ROTATING

KO38CS-R
KO38CS

KO42CS-R
KO42CS



CALCINABILE / CASTABLE

ROTANTE / ROTATING
NON ROTANTE / NO ROTATING

KO33CAR
KO33CA

KO38CAR
KO38CA

KO42CAR
KO42CA

KO50CAR
KO50CA



CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

ROTANTE / ROTATING
NON ROTANTE / NO ROTATING

KO38CR-R
KO38CR


KO42CR-R
KO42CR

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.80 Codice /Code	ø 4.25 Codice /Code	ø 5.0 Codice /Code
	ANALOGO / ANALOGUE	---	KO-01	KO-01	---
	TRANSFER / TRANSFER	---	KO-06	KO-06	---
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	---	KO-04	KO-04	---
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	KO38MU-1	KO42MU-1	---
	H.2	---	KO38MU-2	KO42MU-2	---
	H.3	---	KO38MU-3	KO42MU-3	---
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.3	---	KO38MU17	KO42MU17	---
	30° H.3	---	KO38MU30	KO42MU30	---
	VITE / SCREW	---	DP-13/KV	DP-13/KV	---

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.80 Codice /Code	ø 4.25 Codice /Code	ø 5.0 Codice /Code
  	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	---	KO-03	KO-03	---
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	---	KO-05	KO-05	---
	CALCINABILE CASTABLE	---	KO-02	KO-02	---

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

SCREW VENT[®]

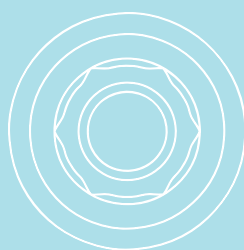

Altre compatibilità:
other compatibility:

ALPHA BIO[®]
BIO - HORIZONS[®]
IMPLANT DIRECT[®]
ISOMED[®]
MIS[®]SEVEN[®]

Accessori / Accessories

ø 3.30 Codice /Code	ø 3.50 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
MS33AN	DP-01	DP-01/A	
---	SV35CI-R	SV45CS-R	
---	DP-43	DP-44	
---	DP-43/A	DP-44/A	
MS33VG-3	DP-43/B	DP-44/B	
MS33VG-4	DP-43/C	DP-44/C	
MS-33/1	DP-05	DP-100/A	
---	DP-06	DP-101/A	
MS-33/3	DP-07	DP-102/A	
---	DP-08	---	
---	DP-02/E	---	
MS-3315	DP-02	DP-02/C	
---	DP-02/D	---	
---	DP-03	---	
DP-13MS	DP-13I	DP-13I	

ANALOGO / ANALOGUE



TRANSFER / TRANSFER



VITE DI GUARIGIONE
HEALING ABUTMENT



H.2

H.3

H.4

H.5

MONCONI DRITTI
STRAIGHT ABUTMENT



H.1

H.2

H.3

H.4

MONCONI ANGOLATI
ANGLED ABUTMENT



15° H.1

15° H.2

15° H.3


25° H.2

VITE / SCREW




DENTAL PLANET Sas web-site: www.dental-planet.it e-mail: info@dental-planet.it

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice / <i>Code</i>	ø 3.50 Codice / <i>Code</i>	ø 4.50 Codice / <i>Code</i>	
	ANALOGO / ANALOGUE	---	LA010	---	
	TRANSFER / TRANSFER	---	LTE010	---	
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT	---	LMEVG	---	
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.1	---	SVMU-1	---	
	H.2	---	SVMU-2	---	
	H.3	---	SVMU-3	---	
	H.4	---	SVMU-4	---	
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17° H.3	---	SVMU-17-3	---	
	30° H.3	---	SVMU-30-3	---	
	VITE / SCREW	---	DP-77/T	---	

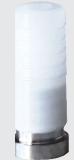Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice /Code	ø 3.50 Codice /Code	ø 4.50 Codice /Code	
    	MONCONE PROVVISORIO TEMPORARY ABUTMENT	---	LEP010	---	
	PROVVISORIO PER SALDATURA TEMPORARY FOR WELDING	---	LEP010-L	---	
	MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENTE FOR BOLDING	---	BRK-S MUA	---	
	CALCINABILE CASTABLE	---	LMCE1	---	
	CALCINABILE CR/CO CR/CO CASTABLE	---	LMCE1-CR	---	


Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

STRAUMANN®
BONE LEVEL®

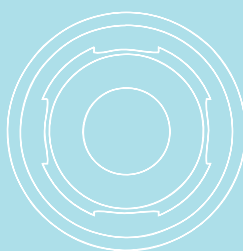

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3.30 Codice / <i>Code</i>	ø 4,10/4,70 Codice / <i>Code</i>		
	ANALOGO / ANALOGUE	BOLAN3	BOLAN4		
	TRANSFER / TRANSFER	BOLCO-3	BOLCO-4		
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.3	BOLVG3-3	BOLVG4-3		
	H.4	BOLVG3-4	BOLVG4-4		
	H.5	BOLVG3-5	BOLVG4-5		
	MONCONI DRITTI STRAIGHT ABUTMENT				
	H.2	BOLMT33-2	BOLMT47-2		
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	17°	BOLMT3317	BOLMT4717		
	VITE / SCREW	DP-13BOL	DP-13BOL		


Ø 3.30	Ø 4,10/4,70		
Codice /Code	Codice /Code		

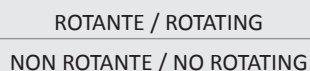


BOL47PR



BOLCI4

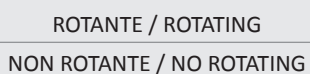

BOLCA4

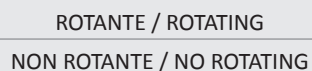

BOL47CR

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

STRAUMANN®
TISSUE LEVEL



Altre compatibilità:
other compatibility:
GEASS® WAY® ROMA

Accessori / <i>Accessories</i>		ø 4,8 Codice / <i>Code</i>			
	ANALOGO / ANALOGUE	MAXX5022			
	TRANSFER / TRANSFER	MAXX48CO			
	VITE DI GUARIGIONE HEALING ABUTMENT				
	H.2	MAXX5001			
	H.3	MAXX5002			
	H.4	MAXX5003			
	MONCONE DRITTO ANATOMICO ANATOMICAL STRAIGHT ABUTMENT	MAXX5007-L			
	MONCONE DRITTO FRESABILE MILLABLE STRAIGHT ABUTMENT	MAXX5008			
	MONCONI ANGOLATI ANGLED ABUTMENT				
	15°	MAXX5017			
	25°	MAXX5025			
	VITE / SCREW	MAXX5016			

Accessori / *Accessories*

Ø 4,8

Codice /Code



MONCONE PROVVISORIO
TEMPORARY ABUTMENT

ROTANTE / ROTATING

MAXX5035-R

NON ROTANTE / NO ROTATING

MAXX5035



MONCONE PER INCOLLAGGIO
ABUTMENT FOR BONDING

ROTANTE / ROTATING

MAXX48CI-R

NON ROTANTE / NO ROTATING

MAXX48CI



CALCINABILE / CASTABLE

ROTANTE / ROTATING

MAXX5004-R

NON ROTANTE / NO ROTATING

MAXX5004



CALCINABILE CR/CO
CR/CO CASTABLE

ROTANTE / ROTATING

MAXX48CR-R

NON ROTANTE / NO ROTATING

MAXX48CR



OVERLOC

H.1

STR-480/1

H.2

STR-480/2

H.3

STR-480/3

Accessori compatibili
FUORI PRODUZIONE
disponibili fino ad esaurimento

Compatible Accessories
OUT OF PRODUCTION
accessories available to end of stock

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

CAMLOG®

99

Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

GLOBAL[®]

Ø 3,8

Codice /Code


Ø 3,8

Codice */Code*

Ø 4,3


Codice /Code

Ø 4,3

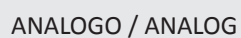Codice /Code

GLO38A

GLO43A

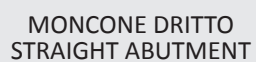

GLO38MT

GLO43MT



ROTANTE / ROTATING

GLO38CAR

GLO43CAR

NON ROTANTE / NO ROTATING




GLO38CA

GLO43CA


Accessori compatibili con:
Accessories compatible with:

WINSIX®




Accessori / <i>Accessories</i>		ø 3,3 Codice /Code	ø 3,8 Codice /Code	ø 4,5 Codice /Code	
 MONCONE FRESABILE MILLABLE ABUTMENT  CALCINABILE / CASTABLE NON ROTANTE / NO ROTATING  MONCONE PER INCOLLAGGIO ABUTMENT FOR BONDING NON ROTANTE / NO ROTATING		WIN33MT	---	WIN45MT	
		WIN33CA	WIN38CA	WIN45CA	
		WINCI33	WINCI38	WINCI45	

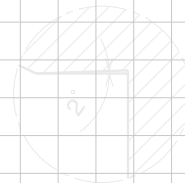
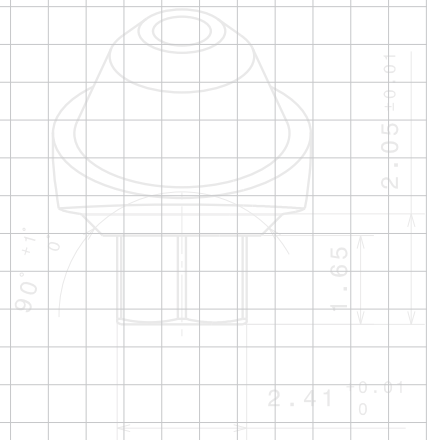
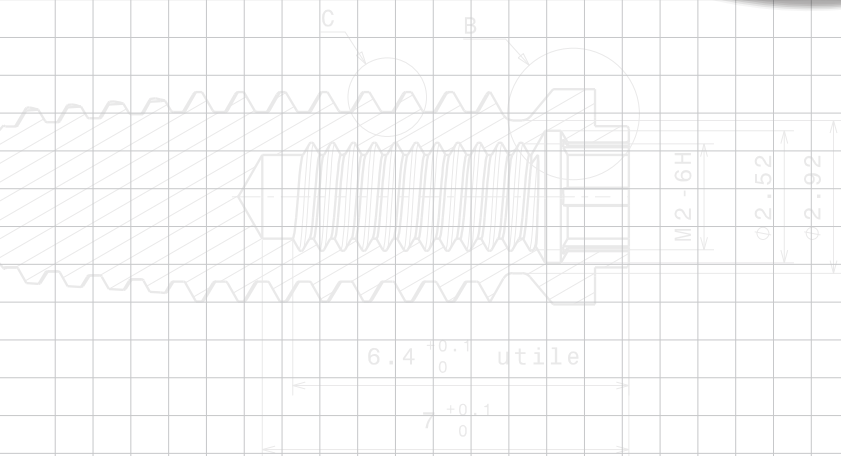


Dettaglio C
Scala: 20:1

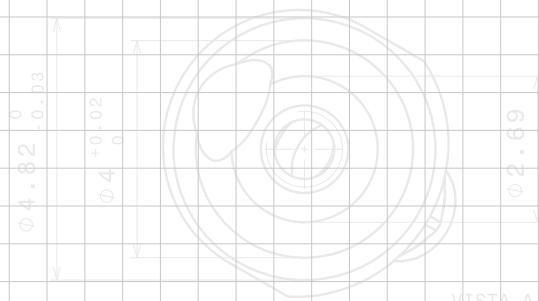


Dettaglio C
Scala: 15:1

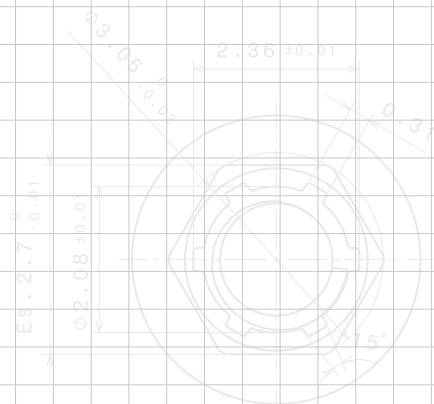
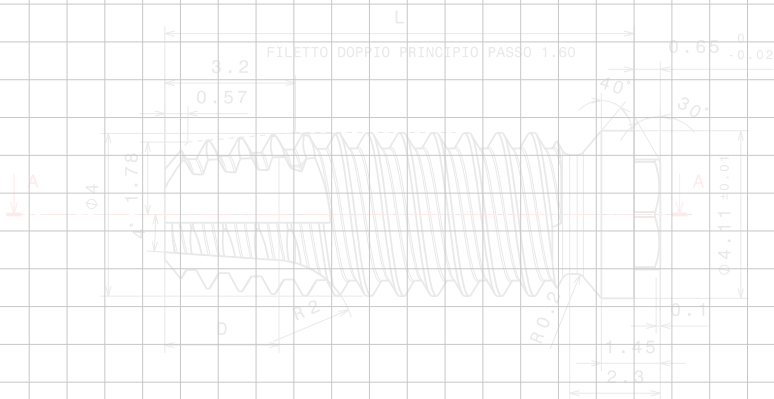
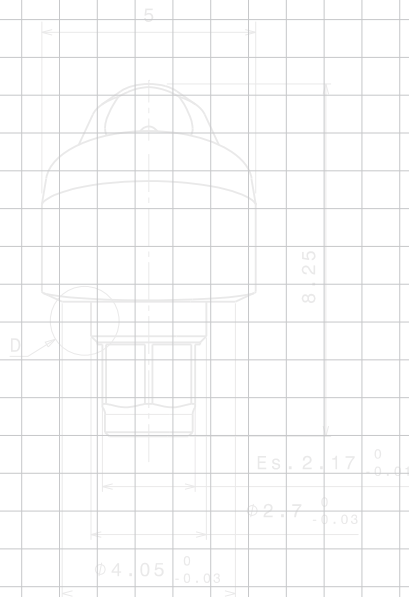


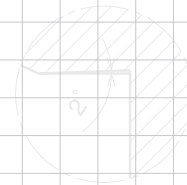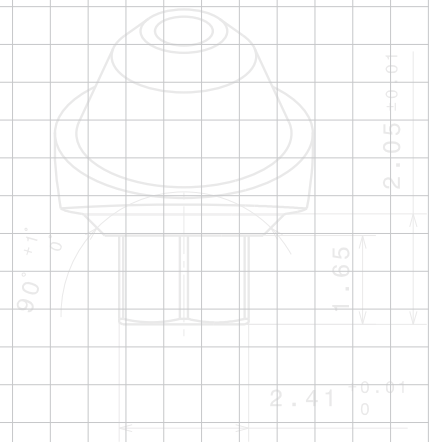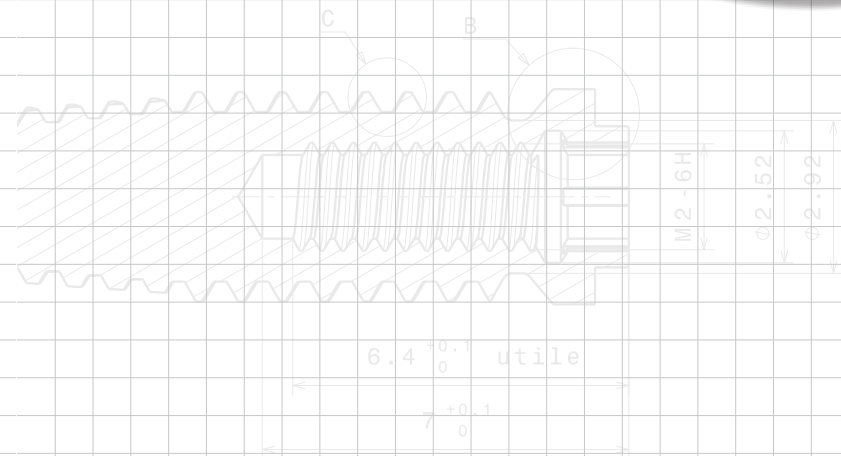


Dettaglio C
Scala: 20:1

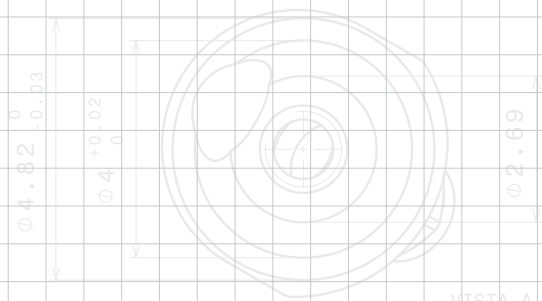

Dettaglio C
Scala: 15:1

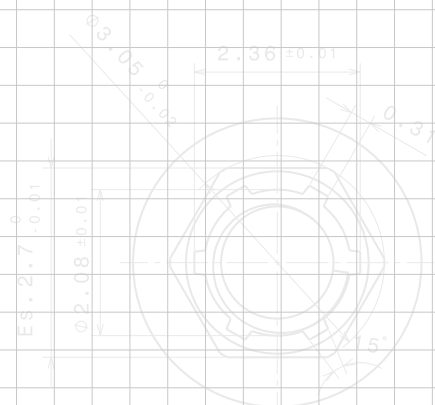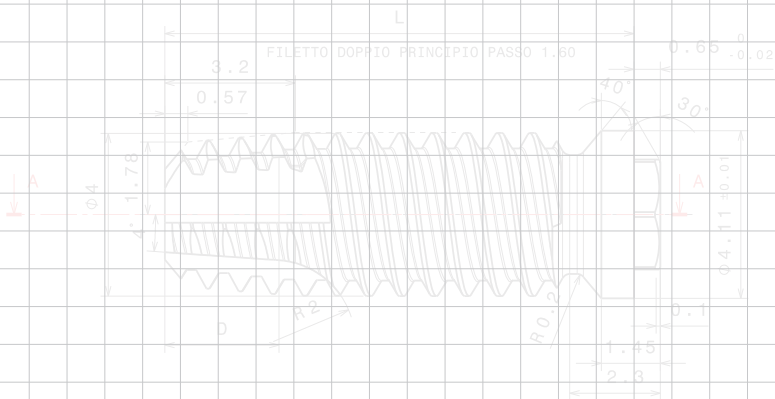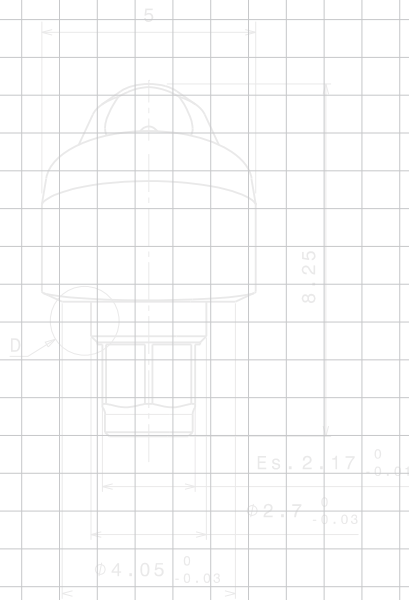

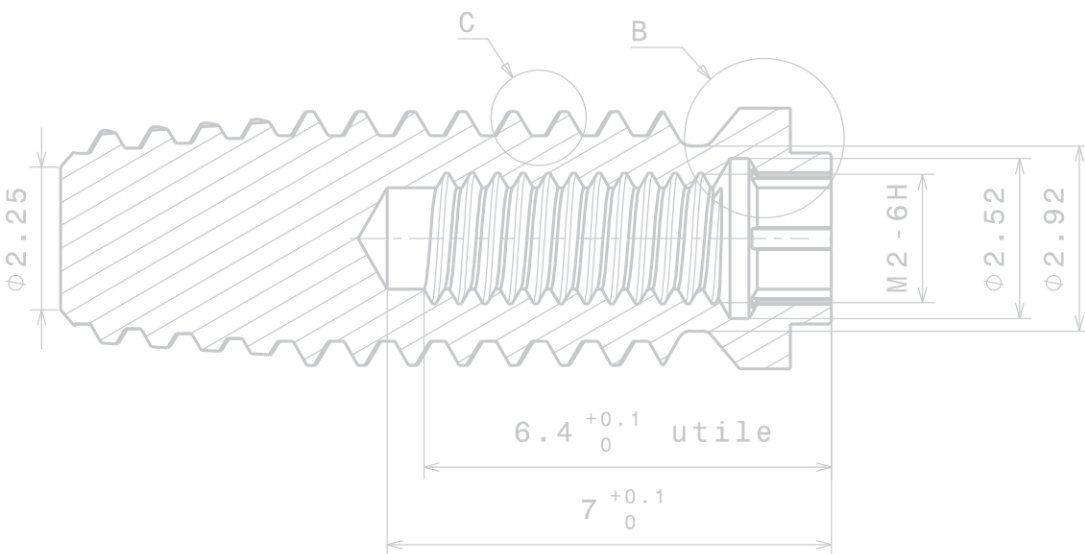

IMPLANT COMPANY

RIVENDITORE DI ZONA:

Dental Planet s.a.s


Via Imola, 90/B - 41125 Modena - I

Tel. +39 059 395336


Sito: www.dental-planet.it

E-mail: info@dental-planet.it


Dettaglio D
Scala: 20:1

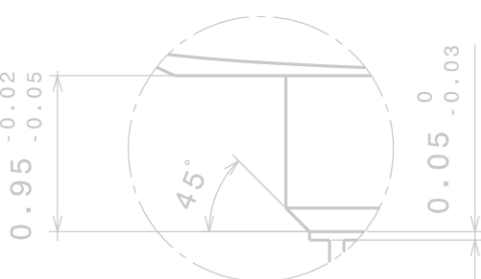

VITE 859

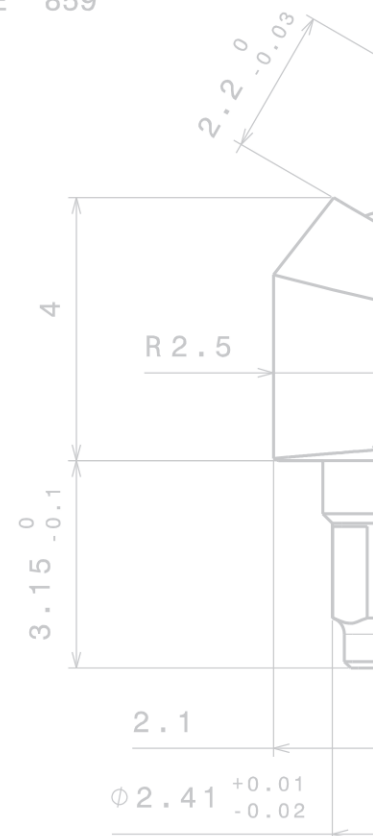

Dettaglio B
Scala: 15:1

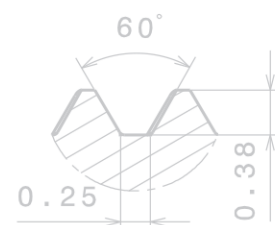

Dettaglio C
Scala: 15:1

