

EUROCOM

LAB.

**TOP QUALITY LABORATORY
PROGRAMM & ACCESSORIES**

DENTAL TECHNICIAN
FURNITURE



LAB: WORK BENCHES MODULAR SYSTEM /



L. 1790 X P. 600 X H. 865/925



**I PIANI SUPERIORI SONO
IN LAMINATO IDROREPELENTE
ED ANTIGRAFFIO.**

I cassetti sono montati su guide con cuscinetti a sfere che permettono di ottenere un elevato grado di scorrevolezza e nel loro interno sono dotati di bacinelle in pvc disponibili lisce o a scomparti. Tutti i banchi da lavoro sono corredati di impianto elettrico, attacco gas, siringa aria compressa, predisposizione per aspirazione, caviglia in legno e protezione inox su ogni posto di lavoro.



L. 690 X P. 600 X H. 865/925


T0122
NEW
VERSION



T0122
L 2050 X P 600 X H 865/925

**WORK BENCHES OF
EUROCOM'S LABORATORY
PROGRAMM**

are made in top quality electric galvanized 10/10 steel. Structure and anodized aluminium handles are painted using epoxy-powders which are available in RAL and GAT colours.

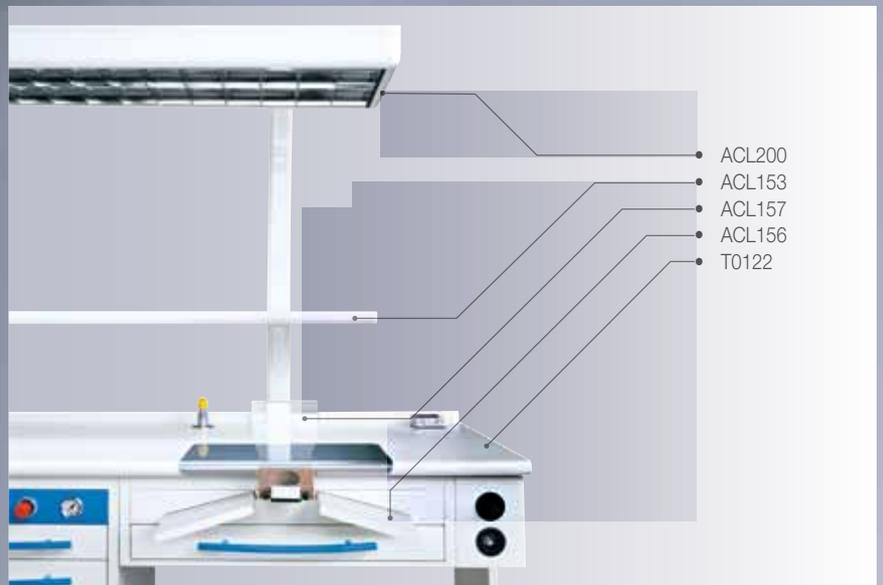

SERVICE UNITS & ACCESSORIES



I BANCHI DA LAVORO DELLA LINEA LABORATORIO EUROCOM, sono costruiti in lamiera elettrozincata di prima qualità spessore 10/10. I frontali di tutti i componenti e le maniglie in alluminio anodizzato sono verniciati a polveri epossidiche nelle colorazioni RAL e GAT.

WORK BENCHES OF EUROCOM'S LABORATORY PROGRAMM are made in top quality electric galvanized 10/10 steel. Structure and anodized aluminium handles are painted using epoxy-powders which are available in RAL and GAT colours.





ACL180

LA STRUTTURA MODULARE DEI MOBILI DA SERVIZIO EUROCOM permette di organizzare al meglio il vostro ambiente operativo. I mobili di servizio possono essere equipaggiati oltre che di piani in laminato anche di piani in acciaio inox. Le cappe hanno una struttura in acciaio inox e sono dotate di aspiratore, piano in acciaio, vetro scorrevole in cristallo temperato e due prese di corrente schuko. A richiesta può essere inserito all'interno della cappa il fornello a due fuochi.

THE MODULAR STRUCTURE OF EUROCOM'S SERVICE FURNITURE allows a functional organisation in your working area. Units can be fitted either with normal laminated tops and stainless steel tops. Stainless steel extraction hoods are fitted with dust extraction motor, stainless steel work top, sliding crystal tempered glass door, two schuko power sockets. On request a burner can be fitted inside the extractor unit.



Q0020 _ L.750 X P.530 X H.600



Q0006
ACL197

BOX: PROFESSIONAL WORK UNIT /

COMFORT DI LAVORO ASSICURATO

L'unità di lavoro professionale BOX by Eurocom è concepita per salvaguardare la salute dell'odontotecnico nelle operazioni di sgrossatura e finitura. Predisposto per destri e mancini, è provvista di una schermatura in vetro temperato con maniglietta, barriera di sicurezza tra l'operatore e il piano di lavoro in ABS sagomato, atto ad alloggiare razionalmente micromotore, turbina, siringa aria e vaschette di servizio. L'ampio spazio e la maggiore inclinazione del vetro permettono all'operatore di esprimere tutte le proprie capacità professionali senza intralci. Il punto di appoggio tridimensionale regolabile consente l'ottimale posizionamento nella zona operativa. L'aspirazione ad invaso, il convogliatore anteriore ed il filtro semisferico asportabile per il recupero di piccoli manufatti permettono la totale eliminazione delle polveri. Il sistema filtrante è costituito da un motore aspirante di grande portata di tipo induttivo esente da manutenzione con manichette e filtro in tessuto ad alta efficienza ad intasamento progressivo per una rapida pulizia. Rigenerabili per contenere costi aggiuntivi nel tempo. Completo di impianto di illuminazione schermato a LED, siringa aria, prese di corrente, consolle comando con protezione 10A, pedana sagomata. Gruppo manometro-regolatore di pressione incluso. Lente di ingrandimento a richiesta.



T0142
L 850 X P 600 X H 1150
PESO / WEIGHT: 80 KG





- 1 · Manometro per regolazione della pressione
- 2 · Riduttore di pressione
- 3 · Passacavo per micromotore
- 4 · Supporto tridimensionale regolabile
- 5 · Attacco aria per turbina
- 6 · Siringa aria
- 7 · Ingresso sistema aspirante
- 8 · Impianto luce a LED integrato

- 1 · Manometer for pressure regulation
- 2 · Pressure reducer
- 3 · Cable entry for micromotor
- 4 · Adjustable three-dimensional support
- 5 · Air inlet for turbine
- 6 · Air syringe
- 7 · Filtering system entry
- 8 · Shielding internal LED light plant

WORKING COMFORT

BOX by Eurocom is a professional work unit that has been conceived to protect health during roughing and finishing operations.

BOX is provided with:

- Toughened glass shielding;
- Adjustable three-dimensional support;
- Shielding internal LED light plant;
- 2 anatomic arm-supports;
- 4 sockets; air syringe;
- 10A delayed protection console;
- Shaped foot board.

The filtering system is made of a maintenance-free high-power suction motor and high efficiency filtering canvas hoses. Manometer and pressure regulator included.


On request: magnifying lens.



Sistema aspirante /
Filtering system

COLORI / COLORS / FARBEN / COULEURS

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta • Other RAL colors are available upon request • Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar • D'autres teintes ral sont disponibles sur demande.

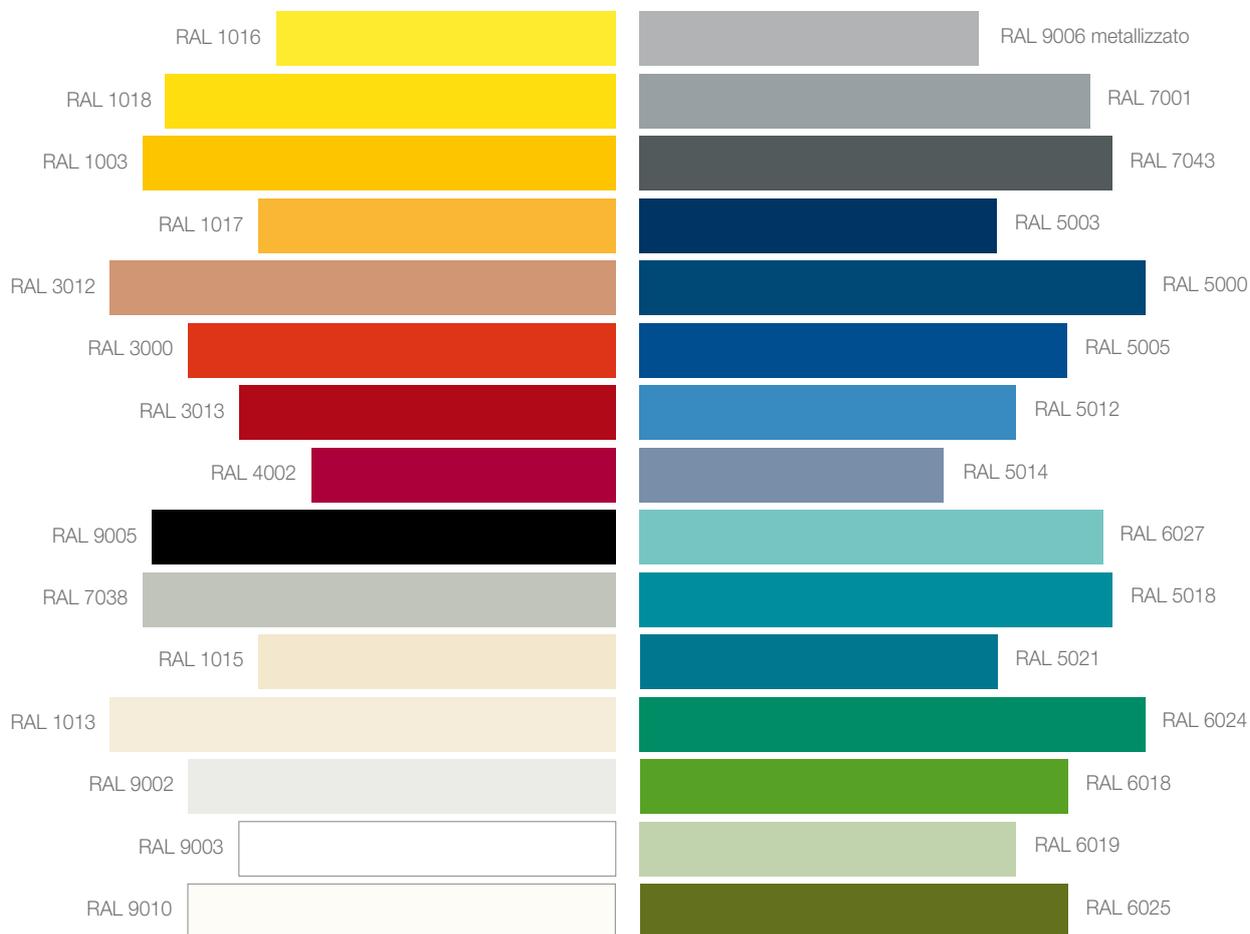

MANIGLIE / HANDLES / GRIFF / POIGNÉES



R1



R2



R3



R4

EUROCOM

EUROCOM - Via Nuova di Corva, 86 - 33170 Pordenone - Italy - Tel./Fax +39 0434 573160
email: info@eurocompn.com - www.eurocompn.com